


- ☉ Steckachse mit Bedienungsunterstützung
- ☉ Änderung der Antriebsradbuchse
- ☉ Abklärungsbogen für Produktberatungen

Produkt-Info: Option „Steckachse mit Bedienungsunterstützung Druckknopf groß“

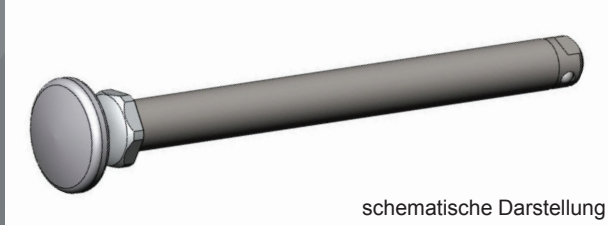


schematische Darstellung

Bei dieser Option ist die Steckachse mit einem großflächigen Druckknopf ausgestattet, was dem Nutzer eine einfache Bedienung, auch mit dem Handballen, ermöglicht. Der Druckknopf steht dabei etwas über die Oberfläche der Nabe hervor. Der Achsdurchmesser beträgt 12mm.

Bei Produkt-Neubestellungen als Ausstattung: Artikelnummer 9000200096 72,80 € / Paar (zzgl. MwSt.)
Bei Ersatzteilbestellungen/Nachrüstung: Artikelnummer 8000200096 79,10 € / Stück (zzgl. MwSt.)

Service-Info: Änderung der Antriebsradbuchse bei unseren Rollstühlen

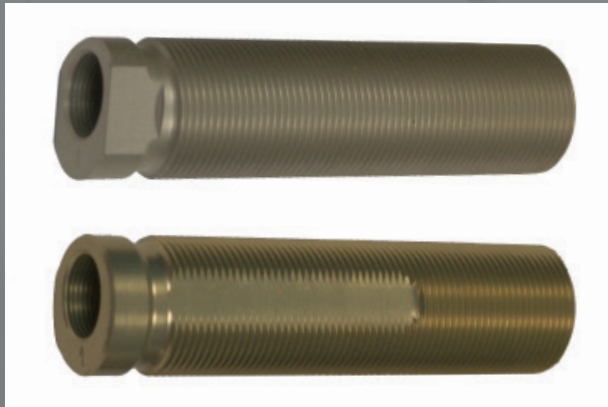

Die Antriebsradbuchse wurde konstruktiv geändert, um die Handhabung bei der Einstellung der Radposition zu optimieren. Nun kann mit der Antriebsradbuchse näher an die Alu-Befestigungsmutter „gefahren“ werden.

Aufgrund dieser konstruktiven Änderung ist künftig ein Gabelschlüssel SW 22 mm zur Einstellung der Radposition notwendig. Gerne senden wir Ihnen kostenlos einen entsprechenden Gabelschlüssel SW 22 zu. Kontaktieren Sie dazu Herrn Daniel Kiefer unter d.kiefer@proactiv-gmbh.de oder Tel. 07427 9480-310.

Service-Info: Abklärungsbogen für Produktberatungen

Abklärungsbogen PG 18 Krankenfahrzeuge

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH • Im Hofstätt 11 • 72359 Dotternhausen

PROACTIV[®]
REHA - TECHNIK

Indikation:	Datum:
Weitere Einschränkungen:	Vorname:
Versicherter / Name:	Geschlecht: männlich weiblich
Geburtsdatum:	Körpergröße (cm):
Körpergröße (cm):	Körpergewicht (Kg):
Körpergewicht (Kg):	Kostenträger:
Kostenträger:	Leistungsbringer:
Leistungsbringer:	Ansprechpartner:
Ansprechpartner:	Tel./E-Mail:
Mitarbeiter PRO ACTIV:	
I. Versorgungsanlass* / *Ⓞ	
Erstversorgung	Zweitversorgung
Folgeversorgung	Umversorgung

*Erstversorgung = Einmalige Verordnung eines Hilfsmittels einer bestimmten Produktart zu einem bestimmten Versorgungszweck.

In unserem Downloadbereich finden Sie unseren neuen Abklärungsbogen als beschreibbare pdf-Datei. Dieser Abklärungsbogen dient als Unterstützung bei Beratungen, um alle wichtigen Punkte beim Nutzer abzufragen und daraus resultierend das richtige Produkt mit der für den Nutzer passenden Ausstattung auszuwählen. Die beschreibbare pdf ermöglicht eine einfache Ablage der Informationen und deren Weiterleitung per e-mail.