
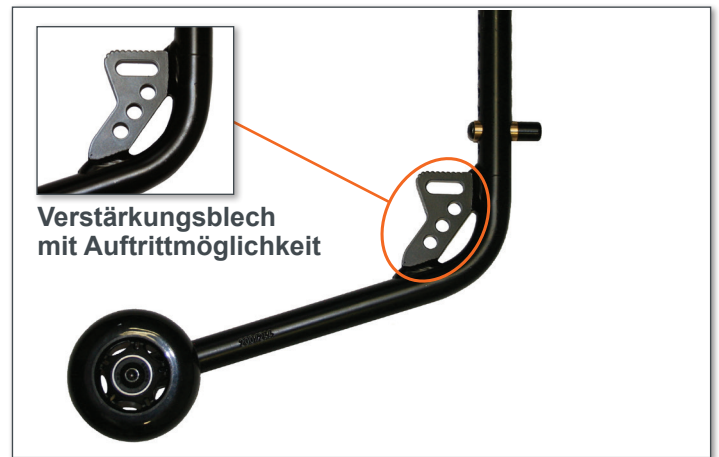


Kippstützen & Schiebegriffe

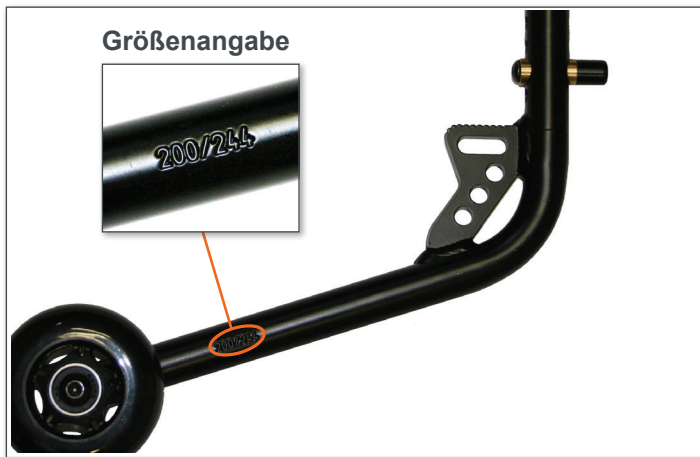

Materialänderung

Die Kippstützen und Schiebegriffe sind künftig aus Edelstahl. Die Optik der Kippstützen ist weiterhin schwarz und die der stufenlos höhenverstellbaren Schiebegriffe künftig Edelstahl.

Kippstütze

Ab sofort ist auf jeder Kippstütze eine Größenangabe eingraviert. Diese Gravur kann bei Ersatzteilbestellungen einfach abgelesen werden. Eine weitere Veränderung bei den Kippstützen ist das Verstärkungsblech mit Auftrittmöglichkeit. Dies soll den Vorgang erleichtern die Kippstütze von der Aktiv- in die Passivposition zu bringen.

Kraftknotenbindung mit Gurtöse für Rollstuhlrückhaltesysteme



Mit Rollstuhlrückhaltesystemen werden Rollstühle in Kraftfahrzeugen befestigt. Zu den Elementen des Rollstuhlrückhaltesystems gehören: Kraftknotenbindung am hinteren Rahmen sowie die Lagerblockzwischenplatte zur Aufnahme des vorderen Retraktors. Die Aufnahme der Retraktoren kann wie bisher über die Schlosszungen oder über die neue Option der Gurtösen erfolgen. Das zugehörige Bestellblatt ist im Downloadbereich zu finden.

Hilfsmittelnummer SPEEDY 4teen

Der Kinder- und Jugendrollstuhl **Speedy 4teen** hat jetzt eine Hilfsmittelnummer: **18.50.03.1087**