




**PROACTIV®**



## LITTY 4all

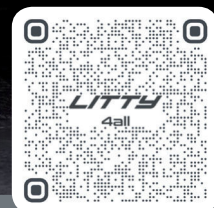

LA CARROZZINA PER BAMBINI  
LEGGERA E STABILE CHE CRESCE CON  
IL SUO COMPAGNO DI AVVENTURE.

La carrozzina per bambini **LITTY 4all** è stata sviluppata appositamente per i piccoli avventurieri. Grazie alla geometria ottimizzata del telaio e alle versatili opzioni di regolazione, si adatta perfettamente alle esigenze dei bambini. Il peso ridotto a 6,7 kg e la resistenza al rotolamento particolarmente bassa la rendono la compagna ideale per i bambini con poca forza nelle braccia. Con LITTY 4all è possibile selezionare 9 parametri del telaio per personalizzare la carrozzina. La larghezza del sedile può partire da soli 18 cm.




### #FunzioneDiCrescita

La LITTY 4all cresce con il bambino grazie a componenti intercambiabili, che la rendono una compagna affidabile per gli anni a venire.



### #PosizioneDiSedutaPerfetta

Il telaio senza tubi anteriori limitanti consente una posizione seduta con la massima abduzione.

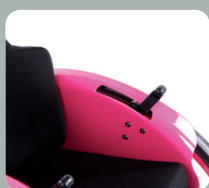

### #Sicurezza

Il comando del freno a leva è posizionata in modo ergonomico nella protezione degli indumenti. Il bullone del freno si trova all'esterno dell'area di presa per evitare che le dita rimangano intrappolate.



### #SupportoPer

Diverse maniglie di spinta e barre forniscono un supporto durante l'avanzamento, mentre i freni presenti consentono di controllare la velocità.



## PERFETTAMENTE COORDINATI E SEMPRE PRONTI PER LA PROSSIMA AVVENTURA.

La **LITTY 4all** viene personalizzata in base alle esigenze del bambino, dalle dimensioni del telaio agli aggiuntivi. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di opzioni, tra cui poggipiedi, freni, maniglie di spinta, schienale e sistemi di seduta, nonché ruote motrici e sterzanti.

### OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Il "poggipiedi ripiegabile all'indietro" facilita il trasferimento dei bambini ancora in grado di stare in piedi.



Il tavolo terapeutico offre una pratica superficie da lavoro, può essere rimosso senza attrezzi ed è regolabile in continuo in altezza e angolazione per una personalizzazione ottimale.



La **ruota anteriore Outdoor** rende la LITTY 4all adatta all'uso fuoristrada su marciapiedi, ghiaia e sentieri forestali. Sollevata da terra e la ruota da 12" supera i dossi senza sforzo. Grazie al morsetto a sgancio rapido, l'attacco della ruota può essere montato facilmente e senza attrezzi.




## DATI TECNICI

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Larghezza del sedile:                        | 18 - 34 cm (con intervalli di 2 cm) |
| Profondità del sedile:                       | 20 - 35 cm (con intervalli di 5 cm) |
| Altezza dello schienale:                     | 20 - 35 cm (con intervalli di 5 cm) |
| Lunghezza della parte inferiore della gamba: | 20 - 44 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza del sedile posteriore:               | 31 - 41 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza del sedile anteriore:                | 34 - 44 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Punto di ribaltamento:                       | 5 - 9 cm (con intervalli di 1 cm)   |
| Peso totale del prodotto:                    | da 6,7 kg                           |
| Peso massimo dell'utilizzatore:              | fino a 50 kg                        |

Dati soggetti a modifiche del progetto.

## SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

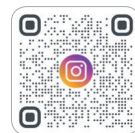

# PRO ACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/it/](http://www.proactiv-gmbh.eu/it/)

Rev. 09/2024\_01

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.