



PROACTIV®



NJ1 Adaptivbike

DAS NJ1 ADAPTIVBIKE – FLEXIBILITÄT TRIFFT KOMFORT

Das NJ1 Adaptivbike ist eine leichte und stabile manuelle Zughilfe für Hobby und Sport. Das Bike wird einfach an den Rollstuhl angekoppelt und ermöglicht ergonomische Bewegungsabläufe sowie das Bewältigen längerer Strecken. Das größere Antriebsrad erleichtert das Überwinden von Unebenheiten und Hindernissen, während hochwertige Schaltungs- und Bremskomponenten für präzise Kontrolle sorgen. Dank der variablen Ausstattung lässt sich das NJ1 individuell vom Touren- bis zum Sportbike konfigurieren.



#LeichtUndLeistungsstark

Das NJ1 Adaptivbike verbindet geringes Gewicht mit hoher Stabilität und exzellenten Fahreigenschaften. So ist es der ideale Begleiter für Freizeit, Sport und längere Touren.



#EinfachesHandling

Der praktische Abstellständer erleichtert das An- und Abkoppeln und sorgt für ein sicheres Abstellen. Während der Fahrt lässt er sich platzsparend anklappen.



#StabileAdaption

Mit Zentral- oder Frontadapter lässt sich das NJ1 Adaptivbike schnell und sicher am Rollstuhl anklappen – für zuverlässige Adaption und einfaches Handling.



#DeinNJ1DeineWahl

Viele Möglichkeiten für Dein perfektes Handbike. Jedes NJ1 Bike wird individuell ausgestattet. Eine Vielzahl an Optionen und Zubehörteilen macht das NJ1 zu Deinem Bike.



VIelfÄLTIGE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR MAXIMALE INDIVIDUALITÄT.

Das NJ1 Adaptivbike bietet flexible Konfigurationen für ein optimales Fahrerlebnis. Umfangreiche Ausstattungsoptionen, wie ein praktischer Abstellständer, und die Auswahl an verschiedenen hochwertigen Schaltungen und Bremsen machen das Handling komfortabel und einfach.

WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Individuelle Griffweiten und Kurbellängen sowie die verstellbare Tretlagerstütze sorgen für eine optimale Anpassung an Deine Bedürfnisse.



Perfekte Schaltung. Das NJ1 Adaptivbike bietet eine breite Auswahl an Gangschaltungen, von Kettenschaltungen bis zur Tretlagerschaltung. Ob mechanisch oder elektrisch – Du entscheidest!



Sichere Bremsen, maximale Kontrolle. Mit Scheiben-, Felgen- oder optionaler Rücktrittbremse bist Du auf der sicheren Seite.





Die optional wählbare Rücktrittbremse mit Kurbelfreischaltfunktion ermöglicht das Entkoppeln der Kurbeln und damit die Rückwärtsfahrt über die Greifringe des Rollstuhls – ideal zum Rangieren auf engem Raum.

TECHNISCHE DATEN

Antriebsart:	manuell mit Gangschaltung
Besonderheiten:	stabil mit exzellenten Fahreigenschaften, Ausstattung variabel von Touren- bis Sportbike sowie Offroad
Gesamtgewicht ohne Adapter:	ab 8,3 kg
Packmaß:	ab 115 x 43 x 50,8 cm
Antriebsradgröße:	20" 24"
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 140 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 170 kg Anhängelast; höhere Anhängelasten auf Anfrage
Schaltungen:	Kettenschaltung oder Nabenschaltung mit Bedienung am Handgriff Tretlagerschaltung
Bremsen:	Scheibenbremse Felgenbremse Rücktrittbremse

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

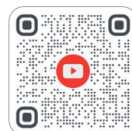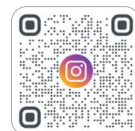

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 08/2026_01
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.