

STABILITÄT, DIE SICH ZUSAMMENFALTEN LÄSST.

So groß, wie die Leistungen des TRAVELERS im täglichen Einsatz sind, so klein ist er, wenn er transportiert werden soll. Die Möglichkeit des eigenständigen Ein- und Ausladens des Rollstuhls beim Autotransport bietet Dir Selbstständigkeit. Mit der extrem verwindungssteifen und zuverlässigen Faltmechanik vereint der TRAVELER die Fahreigenschaften eines Starrrahmenrollstuhls mit den Vorzügen eines Faltrollstuhls.

TRAVELER



#Zuverlässigkeit

Dank seiner hervorragenden Stabilität kannst Du den TRAVELER mit Adaptivbikes, Zug- und Vorsatzgeräten sowie weiteren Adaptionen kombinieren.



#Flexibilität

Viele Einstellungen, wie Kippunkt, Sitzhöhe, Sitzneigung oder Rückenwinkel, kannst Du auch nachträglich auf Deine Bedürfnisse anpassen.




#Selbstständigkeit

Mit seinem kleinen Packmaß, der abklappbaren Rückenlehne und den werkzeuglos abnehmbaren Baugruppen ist der TRAVELER leicht zu transportieren.



#MehrMobilität

Durch das einfache Anfallen kannst Du die Sitzbreite (im Rollstuhl sitzend) um 15 % bzw. 5-10 cm reduzieren, um mühelos schmale Durchgänge passieren zu können.

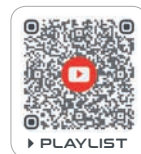

FLEXIBEL, STABIL UND IMMER GUT FÜR EINE REISE.

Dein **TRAVELER** wird individuell nach Deinen Wünschen gefertigt, von den Rahmenmaßen bis zur Ausstattung. Du hast die Wahl bei Optionen wie Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffen, Sitz- und Rückensystemen, Armauflagen sowie Antriebs- und Lenkrädern, um den TRAVELER perfekt auf Dich abzustimmen.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Wendiger Einhandantrieb mit Doppelgreifring für Nutzer mit Halbseitenlähmung oder eingeschränkter Mobilität auf einer Körperseite.



Mit der Heavy Duty Ausstattung ist Dein TRAVELER auch für höhere Belastungen ausgelegt und für ein Nutzergewicht bis zu 180 kg geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	33 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	36 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	37 - 51 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	37 - 43 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	44 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	4 - 13 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 11,5 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 180 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.