




PRO^{ACTIV}

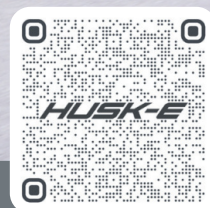

HUSK-E

KRAFTVOLL UND UNFASSBAR KLEIN BEIM TRANSPORT

Das HUSK-E Adaptivbike kombiniert Flexibilität, Leistung und Komfort in einem kompakten Design. Die abklappbare Tretlagerstütze sorgt für ein kleines Packmaß – ideal für den Transport. Drei Varianten stehen zur Wahl: die **Shimano-Ausführung** für intelligente Performance mit vielseitigen Schalt- und Bedienmöglichkeiten sowie komfortabler Automatikschaltung, die **Bafang-Ausführung** für maximale Kraft und direkte Unterstützung ab der ersten Kurbeldrehung mit praktischer Anfahrunterstützung über einen Gasgriff sowie die **manuelle Ausführung** für sportlichen Eigenantrieb. Für größere Kinder und Jugendliche gibt es das HUSK-E mit kurzer Tretlagerstütze. Individuelle Schaltungs- und Einstellungsmöglichkeiten sorgen für hohen Fahrkomfort und eine optimale Anpassung.



#LeistungDieBegeistert

Kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h. Ob flach oder bergig: Das Antriebssystem des HUSK-E unterstützt Dich bis zu 25 km/h. Bewältige mühelos längere Strecken und genieße dabei die Freiheit der Bewegung.



#KompaktUndFlexibel

Das HUSK-E revolutioniert den Transport von Handbikes: Mit der abklappbaren Tretlagerstütze lässt sich das Adaptivbike schnell und unkompliziert verkleinern. Ideal für unterwegs und platzsparend beim Verstauen.



#AusdauerFürJedeTour

Große Akkukapazität und Doppelakku-Option. Mit Reichweiten von bis zu 100 km und der Möglichkeit einer Doppelakku-Halterung sind auch lange Touren kein Problem.



#DreiVariantenFürJedeAnforderung

HUSK-E gibt's als Shimano (intelligente Performance), Bafang (volle Power ab der ersten Drehung) oder als manuelle Version – ganz nach Deinem Bedarf.



FLEXIBEL KONFIGURIERBAR FÜR JEDEN BEDARF.

Das **HUSK-E** passt sich Dir an – ob mit elektrischer Unterstützung oder als manuelles Bike ohne Motor. Verschiedene Schaltungen, Bremsen und ergonomische Anpassungen sorgen für maximalen Komfort. Die abklappbare Tretlagerstütze, der praktische Abstellständer und hohe Reichweiten machen es tourentauglich und leicht zu transportieren.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Zuverlässige Adaption und leichtes Handling. Mit Zentral- oder Frontadapter ist das HUSK-E schnell am Rollstuhl montiert. Der praktische Abstellständer erleichtert zudem das An- und Abkoppeln.



Perfekte Ergonomie für maximalen Komfort. Individuelle Griffweiten und Kurbellängen sowie die verstellbare Tretlagerstütze machen das HUSK-E zu Deinem idealen Begleiter.



Die manuelle Variante des HUSK-E bietet ein sportliches Fahrerlebnis – ganz ohne Motor. Ideal für alle, die aktiv biken und ihre Ausdauer verbessern möchten.





Optional sind Gepäcktaschen inklusive Halterungen wählbar. Die Taschen mit 5,8 l Volumen bieten genug Platz für Deine Einkäufe.

TECHNISCHE DATEN

Motoren: [bei Ausstattung mit el. Unterstützung]	Shimano 85 Nm 3,0 kg
	Bafang 110/130 Nm 3,3 kg
Akkus: [bei Ausstattung mit el. Unterstützung]	Shimano 36 V 14 Ah 504 Wh 2,6 kg
	Reichweite ca. 45 - 75 km
	Shimano 36 V 17,5 Ah 630 Wh 3,5 kg
	Reichweite ca. 55 - 85 km
	Bafang 48 V 14,5 Ah 696 Wh 3,77 kg
	Reichweite ca. 60 - 100 km
Gesamtgewicht ohne Adapter:	Bei elektrischer Variante: ab 14,1 kg (ohne Akku)
	Bei manueller Variante: ab 11,4 kg
Packmaß:	ab 80 x 43 x 80 cm
Antriebsradgröße:	20"
Schiebehilfe/ Anfahrunterstützung: [bei Ausstattung mit el. Unterstützung]	Shimano: bis 4 km/h vorwärts
	Bafang: bis 6 km/h vorwärts

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

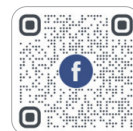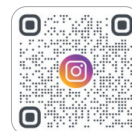

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 08/2026
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.