


**FLEXIBEL, WENDIG & BEREIT  
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.**

## **SPEEDY** 4teen

Klare Rahmenführung, gezielte Gewichthsoptimierung und qualitativ hochwertige Verarbeitung verleihen dem Jugendrollstuhl **SPEEDY 4teen** einen sportlichen Charakter. Mit 8 wählbaren Rahmenparametern lässt er sich perfekt auf Dich abstimmen. Der **SPEEDY 4teen** passt sich dank der Verstellbarkeit der Sitzhöhe und des Kipppunkts einfach an Deine wachsenden Bedürfnisse an. So unterstützt er Dich bei Deinen Fortschritten im Umgang mit dem Rollstuhl und fördert Deine Selbstständigkeit und Mobilität.

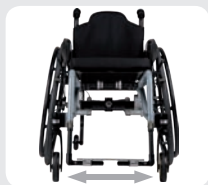


### **#Mitwachsfunktion**

Die Sitzbreite wächst von 26 bis 38 cm durch den Tausch von Baugruppen mit, was den **SPEEDY 4teen** zu Deinem zuverlässigen Begleiter für viele Jahre macht.



### **#Zuverlässigkeit**

Der stabile und langlebige Rahmen steht für maximale Mobilität und Kompatibilität mit Zusatzantrieben und Adaptionen.

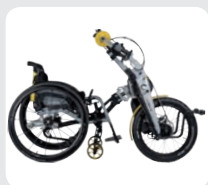

### **#MehrMobilität**

Zuggeräte und Adaptivbikes lassen sich mit wenigen Handgriffen über Adapter anknüpfen.



### **#PerfekteSitzposition**

Du kannst zwischen einem geraden oder abduzierten Rahmen wählen. Der abduzierte Rahmen bietet viel Beinfreiheit und ermöglicht spezielle Beinpositionierungen.



## DEIN WEGBEGLEITER FÜR MEHR MOBILITÄT.

Der **SPEEDY 4teen** wird speziell nach Deinen Bedürfnissen gefertigt, sowohl in Bezug auf die Rahmenmaße als auch die Ausstattung. Du kannst aus einer Vielzahl an Optionen wählen, darunter Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffe, Rücken- und Sitzsysteme, Kleiderschützer, Armauflagen sowie Antriebs- und Lenkräder. So wird Dein **SPEEDY 4teen** genau zu dem Rollstuhl, der perfekt zu Dir passt.

### EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Wendiger Einhandantrieb mit Doppelgreifring für Nutzer mit Halbseitenlähmung oder eingeschränkter Mobilität auf einer Körperseite.



Für das Fahren mit Handbike kann über die werkzeuglos abnehmbare Radstandsverlängerung mehr Traktion erreicht werden.

## TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	26 - 43 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	32 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	20 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	36 - 47 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	40 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	1 - 10 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 9,2 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 100 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

## FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



**PROACTIV**<sup>®</sup>

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

Rev. 09/2024  
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.