

HUSK-E

KRAFTVOLL UND UNFASSBAR KLEIN BEIM TRANSPORT

Das HUSK-E Adaptivbike kombiniert Flexibilität, Leistung und Komfort in einem kompakten Design. Die abklappbare Tretlagerstütze sorgt für ein kleines Packmaß – ideal für den Transport. Drei Varianten stehen zur Wahl: das kraftvolle **Shimano-Modell** für bergiges Gelände, die leise und kraftsparende **Neodrives-Version** für flacheres Terrain und die **manuelle Ausführung** für sportlichen Eigenantrieb. Für größere Kinder und Jugendliche gibt es das HUSK-E mit einer kurzen Tretlagerstütze. Eine individuelle Schaltungswahl, ergonomische Einstellungsmöglichkeiten und effiziente Bremsen sorgen für besten Fahrkomfort und Sicherheit.



#LeistungDieBegeistert

Kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h. Ob flach oder bergig: Das Antriebssystem des HUSK-E unterstützt Dich bis zu 25 km/h. Bewältige mühelos längere Strecken und genieße dabei die Freiheit der Bewegung.



#KompaktUndFlexibel

Das HUSK-E revolutioniert den Transport von Handbikes: Mit der abklappbaren Tretlagerstütze lässt sich das Adaptivbike schnell und unkompliziert verkleinern. Ideal für unterwegs und platzsparend beim Verstauen.



#AusdauerFürJedeTour

Große Akkukapazität und Doppelakku-Option. Mit Reichweiten von bis zu 85 km und der Möglichkeit einer Doppelakku-Halterung sind auch lange Touren kein Problem.



#DreiVariantenFürJedeAnforderung

HUSK-E gibt's als Shimano (kraftvoll für bergiges Gelände), Neodrives (leise, kraftsparend für flacheres Terrain) oder als manuelle Version – ganz nach Deinem Bedarf.



FLEXIBEL KONFIGURIERBAR FÜR JEDEN BEDARF.

Das **HUSK-E** passt sich Dir an – ob mit Shimano- oder Neodrives-Antriebssystem oder als manuelles Bike ohne Motor. Verschiedene Schaltungen, Bremsen und ergonomische Anpassungen sorgen für maximalen Komfort. Die abklappbare Tretlagerstütze, der praktische Abstellständer und hohe Reichweiten machen es tourentauglich und leicht zu transportieren.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Zuverlässige Adaption und leichtes Handling. Mit Zentral- oder Frontadapter ist das HUSK-E schnell am Rollstuhl montiert. Der praktische Abstellständer erleichtert zudem das An- und Abkoppeln.



Perfekte Ergonomie für maximalen Komfort. Individuelle Griffweiten und Kurbellängen sowie die verstellbare Tretlagerstütze machen das HUSK-E zu Deinem idealen Begleiter.



Die manuelle Variante des HUSK-E bietet ein sportliches Fahrerlebnis – ganz ohne Motor. Ideal für alle, die aktiv biken und ihre Ausdauer verbessern möchten.



Optional sind Gepäcktaschen inklusive Halterungen wählbar. Die Taschen mit 5,8 l Volumen bieten genug Platz für Deine Einkäufe.




TECHNISCHE DATEN

Motoren: [bei Ausstattung mit el. Untertützung]	Mittelmotor: Shimano 85 Nm 250 W 2,7 kg Nabenmotor: Neodrives 12/40 Nm 250 W 4,6 kg
Akkus: [bei Ausstattung mit el. Untertützung]	Shimano 36 V 14 Ah 504 Wh 2,6 kg Reichweite ca. 45 - 75 km Shimano 36 V 17,5 Ah 630 Wh 3,5 kg Reichweite ca. 55 - 85 km Neodrives 36 V 16 Ah 576 Wh 3,6 kg Reichweite ca. 45 - 75 km
Gesamtgewicht ohne Adapter:	Bei elektrischer Variante: ab 14,1 kg (ohne Akku) Bei manueller Variante: ab 11,4 kg
Packmaß:	ab 80 x 43 x 80 cm
Antriebsradgröße:	20"
Schiebehilfe/ Anfahrunterstützung: [bei Ausstattung mit el. Untertützung]	bis 4 km/h vorwärts (Shimano) bis 6 km/h vorwärts und bis 1,5 km/h rückwärts (Neodrives)

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

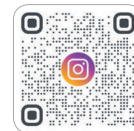

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 05/2025
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.