

NJ1 & FREAK Kompaktbikes

DIE NJ1 & FREAK KOMPAKTBIKES – FAHRSPASS FÜR GROSS & KLEIN

Das **NJ1 Kompaktbike** und das **FREAK Kompaktbike** stehen für Fahrspaß, Flexibilität und individuelle Anpassung. Die modulare Bauweise ermöglicht das schnelle Trennen von Antriebseinheit und Chassis – ideal für Transport und Lagerung. Präzise Lenkgeometrie, langer Radstand und ausgewogene Gewichtsverteilung sorgen für hervorragende Fahreigenschaften. Das NJ1 richtet sich an ambitionierte Freizeitfahrer, während das FREAK speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen abgestimmt ist. Beide Modelle lassen sich vom Touren- bis zum Sportbike individuell konfigurieren.



#MaximaleFlexibilität

Die NJ1 & FREAK Kompaktbikes lassen sich werkzeuglos zerlegen: Antriebseinheit und Chassis trennen, Hinterräder per Steckachse abnehmen – für kompaktes Verladen und Transportieren.



#IndividuelleAusstattung

Mit einer umfangreichen Auswahl an Optionen und Zubehör werden Dein NJ1 oder FREAK Kompaktbike perfekt auf Deine Bedürfnisse abgestimmt. Auch für funktionseingeschränkte Nutzer sind passende Optionen verfügbar.



#SchaltenWieDuWillst

Es stehen Naben- oder Kettenschaltungen sowie mechanische und elektronische Schaltungen zur Wahl – per Handgriff oder Kinn bedienbar.



#KinderUndJugendhandbike

FREAK Kompaktbike: Leicht, kompakt und einfach zu handhaben – perfekt auf die Bedürfnisse junger Fahrer abgestimmt.



NJ1



FREAK



NJ1 & FREAK – SO INDIVIDUELL WIE DU!

Dein NJ1 oder FREAK Kompaktbike wird individuell auf Deine Bedürfnisse abgestimmt. Du entscheidest über eine Vielzahl an Optionen – von Tretlagerstütze über Schaltungs- und Bremssysteme bis hin zu Rücken- und Nackenstütze und Griffvarianten. Ob Touren- oder Sportbike: Dein NJ1/ FREAK passt sich perfekt an Dich an. Dein Handbike, Deine Wahl.

OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Modulare Bauweise: Antriebseinheit und Chassis lassen sich in wenigen Sekunden werkzeuglos trennen, was den Transport und die Lagerung erleichtert.



Individuelle Einstellmöglichkeiten an der Tretlagerstütze, Rückenlehne und Nackenstütze sorgen für optimalen Komfort und Ergonomie.



Sichere Bremsen, maximale Kontrolle. Mit Scheibenbremse oder der optionalen Rücktrittbremse bist Du bei beiden Modellen auf der sicheren Seite.






Perfekte Schaltung. Beide Modelle bieten eine breite Auswahl an Gangschaltungen, von Ketten- über Nabenschaltungen bis zur Tretlagerschaltung. Ob mechanisch oder elektrisch – Du entscheidest!

TECHNISCHE DATEN

Besonderheiten:	Stabil mit exzellenten Fahreigenschaften, Ausstattung variabel von Touren- bis Sportbike
Gesamtgewicht:	NJ1 Kompaktbike: ab 15,8 kg FREAK Kompaktbike: ab 14,8 kg
Packmaß NJ1 Kompaktbike:	Chassis ab 104 x 43 x 39 cm Antriebseinheit ab 105 x 43 x 66 cm
Packmaß FREAK Kompaktbike:	Chassis ab 102 x 43 x 37 cm Antriebseinheit ab 99 x 43 x 50,8 cm
Antriebsrad- & Laufradgrößen:	20" 26"
Rahmenlängen:	102 cm 116 cm
Sitzbreiten:	35 cm 39 cm 43 cm
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 100 kg Zuladung
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	Einzelfreigabe bis 120 kg [nur bei NJ1 Kompaktbike]

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

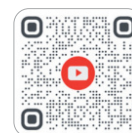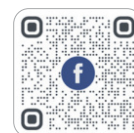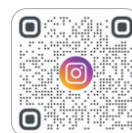

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 08/2026_01
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.