



PROACTIV®



WHEEL-E

MAXIMALE ANTRIEBSKRAFT UND KONTROLLE FÜR JEDES TERRAIN

Das **WHEEL-E** Zuggerät verwandelt Deinen Rollstuhl in einen kraftvollen Begleiter für jede Strecke. Mit seinem 20" Rad, breiter Bereifung und niedrigem Schwerpunkt meisterst Du befestigte Wege, Waldpfade und Steigungen mühelos. Der Akku bietet eine Reichweite bis 45 km, erweiterbar auf 90 km mit einem Doppelakku. Dank Tempomat und spurstabiler Lenkgeometrie genießt Du maximalen Komfort und Sicherheit. Vielseitiges Zubehör ermöglicht eine individuelle Anpassung – für unabhängige Mobilität auf jedem Terrain!



#UnabhängigUnterwegs

Mit einem Handgriff aktivierst Du den Gasgriff und rollst dank 20" Rad und breiter Bereifung mühelos über Gehsteige, Waldwege oder Steigungen.



#MehrGeschwindigkeit

Je nach Ausstattung erreichst Du Geschwindigkeiten von 6 km/h, 15 km/h (optional mit Einzelbetriebslaubnis) oder 24 km/h. Ob in der Stadt, im Gelände oder auf Privatwegen – die Wahl liegt bei Dir.



#StarkeSteigung

Bis zu 15 % Steigfähigkeit. Mit dem kraftvollen Triide-Nabenantrieb bewältigst Du auch anspruchsvolle Steigungen. Perfekt kombiniert mit 5 Unterstützungsstufen und einem Rückwärtsgang für mehr Flexibilität.



#DoppeltSoWeit

Ob Kurzstrecke oder Langtour: Bis 45 km Reichweite mit einem Akku. Mit dem optionalen Doppelakku genießt Du doppelte Reichweite – und die Wechselsteckverbindung macht das Handling beim Akkuwechsel einfach.



INDIVIDUELL AUF DICH ABGESTIMMT.

Das **WHEEL-E** passt sich perfekt an Deine Bedürfnisse an: Mit verstellbarer Lenksäule in Länge, Winkel und Höhe findest Du die ideale Lenkerposition. Der flexible Adapter ist ebenfalls in Höhe, Länge und Winkel anpassbar – für maximalen Komfort und Kontrolle.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Der stabile Zentral- oder Frontadapter wird mit wenigen Handgriffen montiert und hinterlässt kaum Mehrgewicht am Rollstuhl.



Tempomat für entspannte Fahrten. Genieße konstante Geschwindigkeit mit nur einem Knopfdruck. Keine Justierung, kein Stress – nur pure Fahrfreude.



Individualität zählt. Mit Zubehör wie Schutzblechen, Gepäckträgern und Rückspiegeln passt sich das WHEEL-E Deinen Bedürfnissen an – auch für funktionseingeschränkte Nutzer.



150 kg sind bereits im Standard möglich. Bis 170 kg Anhängelast ist mit technischer Ausstattungsprüfung und Heavy Duty Adapter möglich. Höhere Anhängelasten auf Anfrage.





TECHNISCHE DATEN

Motor:	Nabenmotor: Triride I max. 1000 W
Akkus:	Triride 48 V 10,5 Ah 504 Wh Reichweite ca. 25 - 45 km 3,3 kg
Doppelakku:	Möglich; Umschalten über Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze
Gesamtgewicht ohne Adapter:	ab 14,7 kg (ohne Akku)
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung
Packmaß:	ab 90-110 x 63 x 62 cm
Antriebsradgröße:	20"
Geschwindigkeit Antriebssystem:	6 km/h (Schweiz: 10 km/h), 15 km/h (nur mit Einzelbetriebserlaubnis in Deutschland in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr zugelassen), 24 km/h (in Deutschland nur auf Privatgelände zugelassen)

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

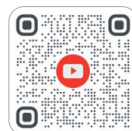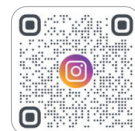

PRO ACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2026_01
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.