



ROLLSTÜHLE FÜR ALLTAG UND SPORT – FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE



PROACTIV®
R E H A - T E C H N I K



www.proactiv-gmbh.de

MOBILITÄT WIRD EINFACH!

MOBILITÄT WIRD EINFACH!



Liebe Leserin, lieber Leser,

mit unserem Markenslogan »Mobilität wird einfach« versprechen wir als innovativer Hersteller von Rollstühlen, Handbikes, Zug- und Vorsatzgeräten höchste Flexibilität und Lebensqualität. Laufend arbeiten wir daran, unseren Kunden von der Anpassung über die Entwicklung bis hin zur Fertigung maximale Individualität und Mobilität zu ermöglichen.

Mit diesem Ziel vor Augen wurde die Ergo-Rollstuhlserie weiterentwickelt und erweitert. Außerdem wurden neue Optionen für unsere Rollstühle ins Programm aufgenommen, wie beispielsweise der Carbon-Kleiderschutz und die Curve-Greifringe. Im Kinderbereich wird der neue LITTY 4all vorgestellt mit seinen zahlreichen Verstellmöglichkeiten.

Aber nicht zu viel vorweg. Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Rollstuhl-Katalog zu präsentieren und wünschen Ihnen viele Anregungen beim Stöbern.

Herzlichst

Jörg Sättele

Geschäftsführender Gesellschafter

Andreas Sättele

Geschäftsführender Gesellschafter

Ein paar Eckdaten:

- Alle unsere Produkte sind »Made in Germany«
- Pro Jahr verarbeiten wir mehr als 100 Tonnen Aluminium
- Der Rolli, der den weitesten Weg bis zu seinem Besitzer zurückgelegt hat, war 9.530 km unterwegs (Chiba, Japan)
- Im Jahr 2014 hat sich unser Umsatz im Reha-Bereich um 11 % gesteigert
- Im Jahr 2014 wurden fünf neue Arbeitsplätze am Standort Dotternhausen geschaffen

WIR ÜBER UNS	4	LITTY 4ALL & 4YOU	26
		BUDDY	28
STARRRAHMENROLLSTÜHLE	6	SPEEDY 4TEEN	30
ÜBERSICHT	6		
SPEEDY 4ALL & 4YOU	8	SPORTROLLSTÜHLE	32
SPEEDY 4ALL & 4YOU ERGO-SERIE	10	ÜBERSICHT	33
SPEEDY A1 & A2	12	SPEEDY 4BASKET	34
SPEEDY F4 & F2	14	SPEEDY 4TENNIS	36
LIFT MECHANISCH & ELEKTRISCH	16	SPEEDY 4BADMINTON	38
FALTRAHMENROLLSTÜHLE	18	OPTIONEN	40
ÜBERSICHT	19	RÜCKENSYSTEME	40
TRAVELER	20	SITZSYSTEME	41
TRAVELER 4ALL & 4YOU ERGO-SERIE	22	EINHANDANTRIEB	42
		WEITERE OPTIONEN	44
KINDER- & JUGENDROLLSTÜHLE	24	SICHERHEIT & CRASHTESTS	46
ÜBERSICHT	24	FARBEN	47

IHR KONTAKT ZU PRO ACTIV



www.proactiv-gmbh.de

Im Internet finden Sie alles über uns, unsere Produkte, Neuheiten und vieles mehr.



Telefon +49 (0) 7427 9480-0

Ihr direkter Draht zu uns. Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen. Werktags von 8 bis 17.30 Uhr (freitags 8 bis 16 Uhr).



Persönlich vor Ort

Auf Messen und Veranstaltungen in ganz Europa können Sie sich über unsere Innovationen und Produkte informieren und selbstverständlich auch testen! Unseren Messe- und Veranstaltungskalender finden Sie unter **www.proactiv-gmbh.de/messe_veranstaltungskalender**



Das Erfolgsrezept unserer Produkte: Begeisterte Mitarbeiter und individuelle Beratung, ...


**WIR STEHEN FÜR »MOBILITÄT WIRD EINFACH«
UND BIETEN IHNEN:**

- qualitativ hochwertige & langlebige Produkte
- Kundenorientierung & Schaffen von Individualität
- Innovationen
- guten Service & individuelle Beratung



Wir haben den Anspruch, Produkte in herausragender Qualität zu entwickeln und zu fertigen, um Ihnen maximale Mobilität in Ihrem Leben zu garantieren!

Diesen Anspruch zu erfüllen, ist die tägliche Herausforderung jedes Mitarbeiters bei PRO ACTIV.

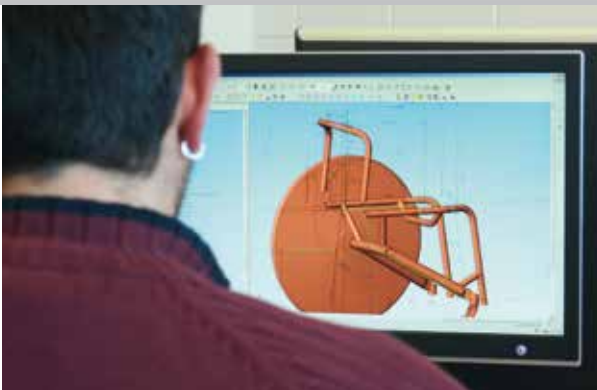

...durchgehende Prozesse vom 3D CAD ...



...bis zur CNC Biegetechnik, ...



...ein ausgeprägter Hang zur Perfektion ...



...sowie Fachpersonal in der Montage und ein geschultes Auge bei der Qualitätskontrolle.

Hohe Fertigungstiefe für Ihre Individualität

PRO ACTIV hat am Standort Dotternhausen eine Produktion mit einer Fertigungstiefe von über 70%. Es werden nahezu alle Bauteile unserer Produkte im eigenen Haus gefertigt. Daraus ergibt sich die Kompetenz, Ihre speziellen Bedürfnisse im Detail umsetzen zu können.

Unsere Rollstühle sind innovativ und von höchster Qualität

Von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Montage, selbst bei der Verarbeitung von Zukaufteilen achten wir auf höchste Qualität und Präzision. Um Ihnen die besten Lösungen zu bieten, arbeiten unsere Konstrukteure eng mit Rollstuhlfahrern, Therapeuten und Fachhändlern zusammen. Jeder einzelne Rollstuhl

wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Regelmäßige Prüfungen nach den Qualitätsstandards DIN 9001 und DIN 13485 sind selbstverständlich.

Testen vor dem Kauf

Sie müssen sich nicht gleich entscheiden! Fahren Sie Ihren Wunsch-Rollstuhl bei Ihrem Fachhändler oder bei uns im Hause Probe.

Service vor Ort

Fachhändler in ganz Deutschland bieten Ihnen Beratung und Service direkt vor Ort.

Mehr Details unter
www.proactiv-gmbh.de



SPEEDY 4all | ab S. 8

SPEEDY 4you | ab S. 8

SPEEDY 4all Ergo | ab S. 10

Merkmale	■ Sitzhöhen- und Kippunktverstellung ■ Große Auswahl an Optionen	■ Sitzhöhen- und Kippunktverstellung ■ Große Auswahl an Optionen ■ Individuelle Rahmengeometrie	■ Sitzhöhen- und Kippunktverstellung ■ Rahmengeometrie mit Sitzknick
Sitzbreite	30 – 52 cm	30 – 52 cm	30 – 52 cm
Sitztiefe	36 – 48 cm	36 – 54 cm	36 – 48 cm
Rückenhöhe	20 – 48 cm	20 – 48 cm	20 – 48 cm
Sitzhöhe hinten (24" Antriebsrad)	39 – 47 cm	39 – 47 cm	39 – 47 cm
Sitzhöhe vorne (5" Lenkrad)	44 – 52 cm	42 – 54 cm	44 – 52 cm
Rückenlehne winkelverstellbar und abfaltbar, ohne Werkzeug	7-fach in 5° Schritten	7-fach in 5° Schritten	7-fach in 5° Schritten
Ergonomische Rückenschale	optional, nach Maß	optional, nach Maß	optional, nach Maß
Ergo Back Rückenlehnenbügel	optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung	optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung	optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung
Integral-Feststellbremse	–	–	optional
Einhandantrieb	optional, mit 2° Sturz	optional, mit 2° Sturz	optional, mit 2° Sturz
Anbau e-fix / e-motion / Twion	optional	optional	optional
Zuladung Standard	bis 120 kg	bis 120 kg	bis 120 kg
Zuladung Heavy Duty Version ¹	bis 180 kg	bis 220 kg	–

STARRRAHMENROLLSTÜHLE

ÜBERSICHT



SPEEDY 4you Ergo | ab S. 10

- Sitzhöhen- und Kippunktverstellung
- Individuelle Rahmengestaltung mit Sitzknick

30 – 52 cm

36 – 54 cm

20 – 48 cm

39 – 47 cm

42 – 54 cm

7-fach in 5° Schritten

optional, nach Maß

optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

optional

optional, mit 2° Sturz

optional

bis 120 kg

–



SPEEDY A1 | ab S. 12

- Sitzhöhen- und Kippunktverstellung
- Äußerst stabile Rahmen-geometrie für besondere Ansprüche

30 – 50 cm

36 – 48 cm

20 – 48 cm

37 – 45 cm

44 – 54 cm

7-fach in 5° Schritten

optional, nach Maß

optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

–

optional, mit 1°, 4°, 6°, 10° oder 12° Sturz

optional

bis 120 kg

über 250 kg möglich



SPEEDY A2 | ab S. 12

- Sitzhöhen- und Kippunktverstellung
- Rahmengestaltung optimal geeignet für den Einsatz mit Treppensteigergeräten

36 – 50 cm

36 – 48 cm

20 – 48 cm

37 – 45 cm

44 – 54 cm

7-fach in 5° Schritten

optional, nach Maß

optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

–

optional, mit 1°, 4°, 6°, 10° oder 12° Sturz

optional

bis 120 kg

bis 150 kg



SPEEDY F4 | ab S. 14

- Keine Verstellmöglichkeiten, Achse fest verschweißt
- Hohe Stabilität und geringes Gewicht

30 – 46 cm

36 – 48 cm

20 – 48 cm

ab 36 cm

44 – 54 cm

optional, 7-fach in 5° Schritten

optional, nach Maß

optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

–

–

optional

bis 120 kg

bis 180 kg



SPEEDY F2 | ab S. 14

- Keine Verstellmöglichkeiten, Achse fest verschweißt
- Hohe Stabilität und geringes Gewicht
- Individuelle Rahmengestaltung

ab 31 cm

31 – 48 cm

20 – 48 cm

ab 36 cm

ab 40 cm

optional, 7-fach in 5° Schritten

optional, nach Maß

optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

optional, nach indiv. Prüfung

–

–

optional

bis 120 kg

bis 180 kg



LIFT/LIFT EL. | ab S. 16

- Kippunktverstellung
- Sitzhöhenverstellung mechanisch oder elektrisch

35 – 46 cm

35 – 48 cm

20 – 48 cm

ca. 45 cm

ca. 50 cm

7-fach in 5° Schritten

optional, nach Maß

optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

–

–

optional

bis 120 kg

bis 140 kg

Alle Maße sind in 1cm-Schritten erhältlich. Individuelle Maße oder Zuladung auf Anfrage.

¹ Individueller Rahmen mit Verstärkung.

Thomas Wiest vor dem Gur-Emir-
Mausoleum in Samarqand, Usbekistan
(Foto: Stefan Kukla)

SPEEDY 4ALL



»Body Contour«: Die federnde und atmungsaktive Sitzbespannung sorgt für höchsten Sitzkomfort und unterstützt die Dekubitus Prophylaxe.






Das kleine Packmaß aufgrund der abfaltbaren Rückenlehne und der flachen Rahmenbauweise sowie das geringe Verladegewicht ab 5,8 kg ermöglichen das einfache Verladen und Transportieren.

- ✓ Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung über Radplatten
- ✓ Einstellbare Sitzneigung über Radplatten, Lenkradgabeln & Lenkräder
- ✗ Kein Sitzknick möglich
- ✓ 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne

- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten;
Option: Abnehmbare Radstandsverlängerung
- ✓ Option: Einhandantrieb für Einhandfahrer
- ✓ Option: Besonders stabile Heavy-Duty Ausführung für Nutzergewicht über 120 kg

& 4YOU

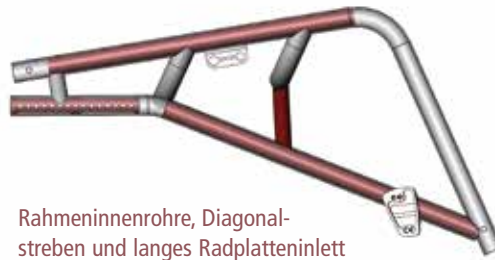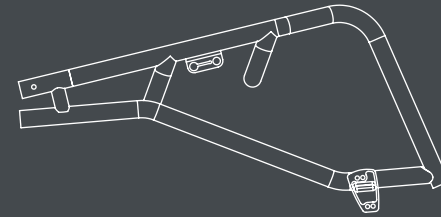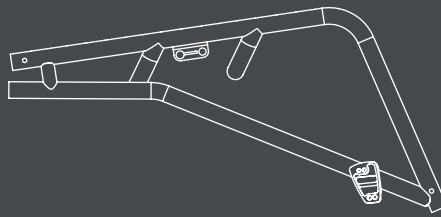

Rahmeninnenrohre, Diagonalstreben und langes Radplatteninlett bei der Heavy Duty Ausstattung

Durch die Ausstattung mit Einhandantrieb (Option) können beide Greifringe auf einer Seite bedient werden. Zudem ist die Kniehebelbremse mit Einhandbedienung wählbar (siehe Seiten 42 und 43).

Mit der Heavy Duty Ausstattung ist der SPEEDY für Extrembelastungen ausgelegt wie beispielsweise ein Personengewicht von bis zu 220 kg.

Die Aktiv-Starrrahmen-Rollstühle SPEEDY 4all & 4you verbinden technisch-sportliches Aussehen mit durchdachten Funktionselementen und Verstellmöglichkeiten. Durch die große Auswahl an Optionen und Zubehör sowie die integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung in 1cm-Schritten sind die SPEEDY 4all & 4you Rollstühle für alle Lebenssituationen bestens geeignet.

Die Rollstühle SPEEDY 4all & 4you können aufgrund ihrer hervorragenden Stabilität mit allen PRO ACTIV Adaptivbikes, Zug- und Vorsatzgeräten kombiniert werden. Ideal für diesen Einsatz ist die 7-fach winkelverstellbare Rückenlehne. Durch diese Option kann eine optimale ergonomische Rückeneinstellung für alle Adaptionssituationen vorgenommen werden.



- Beim SPEEDY 4all sind 7 Rahmenparameter frei wählbar.
- Beim SPEEDY 4you sind 13 Rahmenparameter frei wählbar, wie beispielsweise Kniewinkel, Rahmeneinzug, Unterschenkelweite oben und unten. Jeder Rahmen ist ein Unikat, individuell für seinen Nutzer gefertigt.

Die Rollstühle SPEEDY 4all & 4you unterscheiden sich in den Möglichkeiten der individuellen Rahmengestaltung:

SPEEDY 4ALL

Ergo-Serie

MERKMALE DER ERGO-SERIE:

- Filigrane Rahmengeometrie mit ergonomischem Sitzknick. Stabile Sitzposition durch automatisches Sitzgefälle von 3 cm und »Tuberstopp«.
- Das neue Bremskonzept der Integralbremse (Option). Optimale Bremskraft und schönes Design.
- Schmales Seitenteil. Beim Abklappen der Rückenlehne folgt das Seitenteil dem Rahmenverlauf für ein möglichst kleines Packmaß und optimalen Freiraum beim Verladen.




Die integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung in 1 cm-Schritten ermöglicht Flexibilität in der Anpassung an die Anforderungen des Nutzers.

- ✓ Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung über Radplatten
- ✓ Einstellbare Sitzneigung über Radplatten, Lenkergabeln & Lenkräder
- ✓ Sitzknick für automatische Sitzneigung von 3 cm

- ✓ 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne
- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten; Option: Abnehmbare Radstandsverlängerung
- ✓ Option: Einhandantrieb für Einhandfahrer
- ✗ Keine Heavy-Duty Ausführung möglich

Foto: Timo Wetz

& 4YOU

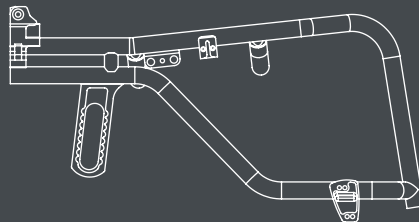

Tan Caglar (Fotomodell, Schauspieler, Seminarleiter zum Thema »Inklusion« und Weltrekordhalter):
»Mein SPEEDY 4you ist mein persönlicher Alltags-
Alleskönner!«



Die »Integral-Feststellbremse« (Option) ist komfortabel in der Bedienung. Bei geöffneter Bremse ist diese komplett unter den Rahmen geschwenkt, sodass ein Freiraum für Finger- und Handbewegung entsteht.



Ausgehend von der natürlichen Anatomie der Hand ermöglicht die ergonomisch optimierte Profilform des Greifrings »Curve« (Option) einen kontrollierten Griff und stabilisiert das Handgelenk.

Die Aktiv-Starrrahmen-Rollstühle SPEEDY 4all & 4you der Ergo-Serie zeichnen sich durch eine filigrane Rahmengemetrie mit ergonomischem Sitzknick aus. Aufgrund der minimierten Rahmengemetrie mit schmalem Seitenteil, dem einfachen Abfalten der Rückenlehne und der Abnehmbarkeit von Baugruppen ohne Werkzeug sind die Rollstühle SPEEDY 4all & 4you der Ergo-Serie ideal zum selbstständigen Verladen.

Durch die hohe Stabilität des Rahmens steht der Adaption eines Adaptivbikes oder Zugerätes nichts im Wege. Die 7-fach winkelverstellbare Rückenlehne bietet Flexibilität für die Sitzposition und die Anpassung des Rückenlehnenwinkels beim Fahren mit einem Adaptivbike oder Zugerät. Die Rollstühle SPEEDY 4all & 4you der Ergo-Serie unterscheiden sich in den Möglichkeiten der individuellen Rahmengestaltung:

Ergo



- Beim SPEEDY 4all sind 7 Rahmenparameter frei wählbar.
- Beim SPEEDY 4you sind 13 Rahmenparameter frei wählbar, wie beispielsweise Kniewinkel, Rahmeneinzug, Unterschenkelweite oben und unten. Jeder Rahmen ist ein Unikat, individuell für seinen Nutzer gefertigt.

SPEEDY A1 & A2



Die Ausstattung mit Einhandantrieb ist bis 12° Radsturz möglich. Weitere Informationen auf den Seiten 42 und 43.





Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet Flexibilität für die Sitzposition, was auch besonders beim Fahren mit Adaptivbikes von Vorteil ist.

- ✓ Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung über Radplatten
- ✓ Einstellbare Sitzneigung über Radplatten, Lenkradgabeln & Lenkräder
- ✓ 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne

- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten; Option: Verlängerte Radplatte als Radstandsverlängerung
- ✓ Option: Einhandantrieb für Einhandfahrer
- ✓ Option: Besonders stabile Heavy-Duty Ausführung für Nutzergewicht über 120 kg bis über 250 kg



Detaillierte Informationen zu allen Produkten und Baugruppen unter www.proactiv-gmbh.de

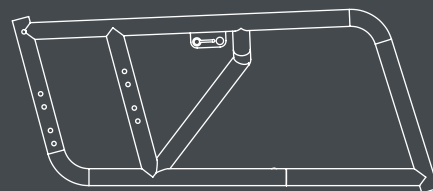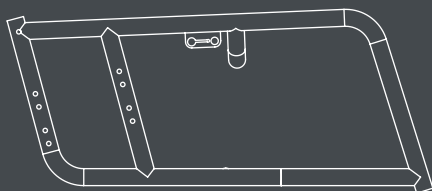

Standardposition



hochgefaltet

»Nach hinten hochfaltbare Fußstütze«: Diese Fußstütze (Option) bietet in hochgefalteter Position viel Fußfreiheit für den Transfer in den oder aus dem Rollstuhl bzw. beim Übersetzen.



Das Abfalten der Rückenlehne und die einfache Abnehmbarkeit von Baugruppen ohne Werkzeug ermöglichen ein kleines Packmaß.



Durch die auf extreme Belastungen ausgelegte Rahmenkonstruktion und die einfachen Einstellmöglichkeiten von Sitzgefälle und Kippunkt bieten der SPEEDY A1 & A2 ein Höchstmaß an Mobilität im täglichen Leben.

SPEEDY A1

Konstruktiv ist die Rahmengengeometrie und Radanbindung des SPEEDY A1 für Extrembelastungen ausgelegt, wie beispielsweise für ein Personengewicht von 200 kg und mehr oder für den Anbau von Antrieben. Für Menschen mit großer Körpergröße (2 m und größer) können individuelle Rahmenabmessungen optimal umgesetzt werden. Für Nutzer

mit einer Halbseitenlähmung oder Plexusproblemen lässt sich ein sehr wendiger Einhandantrieb bis 12° Radsturz montieren.


SPEEDY A2

Die Rahmenkonstruktion des SPEEDY A2 ist speziell auf den Anbau von Treppensteigergeräten wie scalamobil (Ulrich Alber GmbH) und S-MAX (AAT Alber Antriebstechnik GmbH) abgestimmt. Der Anbau ist ab Sitzbreite 36 cm möglich, ohne die Fahreigenschaften und das Gesamtgewicht des Rollstuhls wesentlich zu beeinflussen.

SPEEDY F4 & F2




Sportlicher Carbon-Kleiderschutz (Option) mit geringem Gewicht. Aufgrund der isolierenden Wirkung von Carbon kann die Abkühlung der Oberschenkelaußenseiten bei kaltem Wetter vermindert werden.

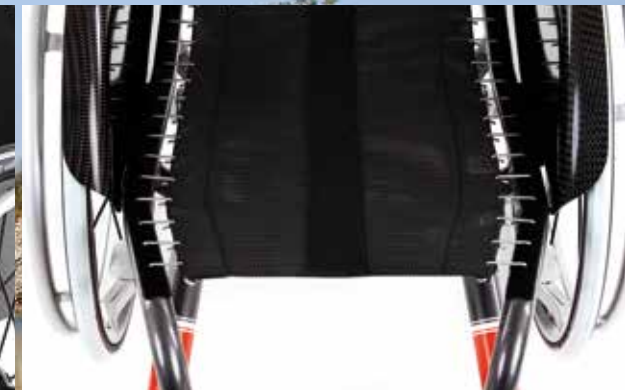

Der Einzug des Rahmenvorbaus beim SPEEDY F2 sorgt für optimale Beinführung und einen dynamischen Auftritt.

- ✓ Fest verschweißte Achse, sehr leichter Rahmen (keine Verstellmöglichkeiten)
- ✓ Einstellbare Sitzneigung über Lenkradgabeln & Lenkräder
- ✗ Sitzknick nicht wählbar, wird bei der Bestellung von großen Sitzneigungen automatisch konstruktiv integriert
- ✓ Option: 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne

- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten; Option: Radstandsverlängerung fest verschweißt oder abnehmbar
- ✗ Kein Einhandantrieb möglich
- ✓ Option: Besonders stabile Heavy-Duty Ausführung für Nutzergewicht über 120 kg

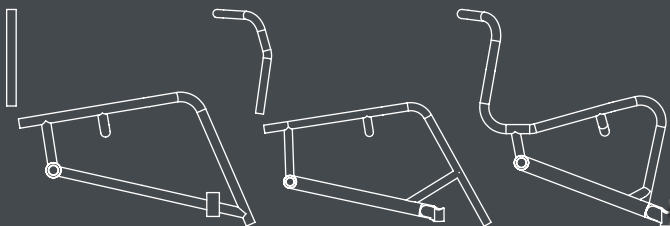

Die Rollstühle SPEEDY F4 und F2 sind auch für verschiedene Sportarten wie Rollstuhltanz und Rollstuhltischtennis geeignet. Marcus Sieger (rechts, Vize-Weltmeister im Rollstuhltischtennis 2014, Peking) nutzt einen SPEEDY F4 mit speziellen Optionen und Umbauten für seinen Tischtennis-Sport. Nawid Reinermann (links, Calisthenics- & Crossfit-Spitzensportler) nutzt seinen SPEEDY F2 nicht nur im Alltag, sondern auch für seinen Sport.



»Rückenlehne Ergo Back mit Rückenpolster« (Option): Die Rückenlehne mit umlaufendem Bügel bietet optische Gestaltungsmöglichkeiten und sorgt für hohe Stabilität der Rückenlehne.



Die fest verschweißte Radstandsverlängerung (Option beim SPEEDY F2) bildet eine starre Einheit mit dem Rollstuhl und ist besonders leicht. Es kann auch eine abnehmbare Radstandsverlängerung gewählt werden.



Die Starrrahmenrollstühle SPEEDY F4 & F2 zeichnen sich durch ihren komplett verschweißten Rahmen und die daraus resultierenden unschlagbaren Fahreigenschaften aus. Durch die konsequente Gewichthsoptimierung und ein geringes Verlademaß sind sie ideal für den täglichen Einsatz. Speziell für erfahrene Rollstuhlfahrer sind der SPEEDY F4 & F2 die richtige Wahl!

Die Rollstühle SPEEDY F4 & F2 unterscheiden sich in den Möglichkeiten der indiv. Rahmengestaltung:

- Beim SPEEDY F4 sind 7 Rahmenparameter frei wählbar.
- Beim SPEEDY F2 sind 14 Rahmenparameter frei wählbar, wie beispielsweise Kniewinkel, Rahmeneinzug, Unterschenkelweite oben und unten. Jeder Rahmen ist ein

Unikat, individuell für seinen Nutzer gefertigt. Beim SPEEDY F2 gibt es die Möglichkeit, die komplette Sitzeinheit nach individuellen Maßen aus einem Aluminium-Rohr zu biegen. Dies sorgt für eine enorme Gewichtsersparnis und eine starre Sitz- und Rückeneinheit ohne jegliches Spiel.

LIFT & LIFT EL.



Foto: Timo Wetz



Der Transport im Kofferraum ist problemlos möglich durch einfaches und werkzeugloses Zerlegen des Rollstuhls in Module.



LIFT manuell: Mit nur wenig Muskelkraft liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben. In dieser Position ist der Rollstuhlfahrer auf Augenhöhe mit einer stehenden Person von ca. 1,75 m Körpergröße.

- ✓ Sitzhöhenverstellung mechanisch od. elektrisch
- ✓ Integrierte Kippunktverstellung
- ✓ Einstellbare Sitzneigung über Lenkradgabeln & Lenkräder
- ✓ 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne
- ✗ Kein Einhandantrieb möglich
- ✓ Option: Besonders stabile Heavy-Duty Ausführung für Nutzergewicht über 120 kg



In Kombination mit dem e-fix-Antrieb der Firma Ulrich Alber GmbH ist der LIFT EL auch eine leichte Alternative zum Elektro-Rollstuhl.



LIFT elektrisch: Über Knopfdruck erreicht der Nutzer die gewünschte Arbeitshöhe und neue Aktionsbereiche.



Die »Swing away Fußstütze« (Option) kann nach außen geschwenkt und abgenommen werden, sodass der Rahmen an der vorderen Bspannungskante endet und viel Raum zum Transfer vorhanden ist.



Für Beruf und Alltag ist der LIFT eine Revolution: Durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung eröffnen sich im Handumdrehen neue Aktionsbereiche. Flexible Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Berufen und die Nutzung von herkömmlichen Möbeln und Kücheneinrichtungen machen den LIFT zum unverzichtbaren Helfer. Tagsüber im Büro erreicht man die Akten im oberen Regal und abends am Kneipentresen bringt Sie der LIFT

auf Augenhöhe mit Ihrem Gesprächspartner. Als Arbeitnehmer sind Sie als Rollstuhlfahrer flexibel an verschiedenen Arbeitsplätzen, Maschinen und Geräten einsetzbar. Durch die Sitzhöhenverstellung können Drucker und Kopierer einfach bedient werden. Oberschränke und obere Regalreihen im Büro oder zu Hause sind erreichbar. Häufig sind keine Umbaumaßnahmen notwendig.

LIFT manuell

Durch die einfache, manuelle und stufenlose Verstellung der Sitzhöhe mittels Gasdruckfedern wird die gewünschte Arbeitshöhe erreicht. Mit nur wenig Muskelkraft liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben.

LIFT elektrisch

Bei eingeschränkter Arm- oder Fingerfunktion steht der LIFT baugleich mit einer elektrischen Hubfunktion zur Verfügung. Über Knopfdruck erreicht der Nutzer die gewünschte Arbeitshöhe. Es besteht die Möglichkeit, den manuellen LIFT mit einer el. Sitzhöhenverstellung auszurüsten. So kann bei fortschreitender Behinderung oftmals kostengünstig umgebaut werden.

Unsere TRAVELER-Faltrollstühle:
Einzigartiger Faltmechanismus für
kleinstes Packmaß und hervorragende
Verwindungssteifigkeit.



Thorsten Krämer in Hamburg
(Foto: Gunther Belitz)

FALTRAHMENROLLSTÜHLE

ÜBERSICHT



TRAVELER | ab S. 20



TRAVELER 4all Ergo | ab S. 22



TRAVELER 4you Ergo | ab S. 22

	TRAVELER ab S. 20	TRAVELER 4all Ergo ab S. 22	TRAVELER 4you Ergo ab S. 22
Merkmale	■ Sitzhöhen- und Kippunktverstellung ■ Große Auswahl an Optionen	■ Sitzhöhen- und Kippunktverstellung ■ Rahmengeometrie mit Sitzknick	■ Sitzhöhen- und Kippunktverstellung ■ Individuelle Rahmengeometrie mit Sitzknick
Sitzbreite	33 – 52 cm	33 – 52 cm	33 – 48 cm
Sitztiefe	36 – 48 cm	36 – 48 cm	36 – 48 cm
Rückenhöhe	20 – 48 cm	20 – 48 cm	20 – 48 cm
Sitzhöhe hinten (24" Antriebsrad)	37 – 43 cm	39 – 45 cm	40 – 47 cm
Sitzhöhe vorne (5" Lenkrad)	44 – 52 cm	44 – 52 cm	42 – 52 cm
Rückenlehne winkelverstellbar und abfaltbar, ohne Werkzeug	7-fach in 5° Schritten	7-fach in 5° Schritten	7-fach in 5° Schritten
Ergonomische Rückenschale	optional, nach Maß, abnehmbar	optional, nach Maß, abnehmbar	optional, nach Maß, abnehmbar
Integral-Feststellbremse	–	optional	optional
Einhandantrieb	optional, bis 12° Sturz, durch abnehmbare Kardanwelle weiterhin faltbar	–	–
Anbau e-fix / e-motion / Twion	optional	nur e-motion	nur e-motion
Zuladung Standard	bis 120 kg	bis 120 kg	bis 120 kg
Zuladung Heavy Duty Version ¹	bis 150 kg, optional bis 180 kg	–	–

Alle Maße sind in 1cm-Schritten erhältlich. Individuelle Maße oder Zuladung auf Anfrage.

¹ Individueller Rahmen mit Verstärkung.



Mehr Details unter
www.proactiv-gmbh.de

TRAVELER



Timo Wetz in der Toscana
(Foto: Hanna Wetz)




Das mit Abstand kleinste Packmaß ab
17 x 35 x 58 cm!



Durch Anfallen kann die Sitzbreite um ca. 15 %
verringert werden (ca. 5 – 10 cm). Bei Engpässen
können diese 15 % entscheidend sein!

- ✓ Anfallen im Rollstuhl sitzend möglich
- ✓ Packmaß ab 17 x 35 x 58 cm
- ✓ Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhen-
verstellung über Radplatten
- ✓ Einstellbare Sitzneigung über Radplatten,
Lenkradgabeln & Lenkräder
- ✗ Kein Sitzknick möglich

- ✓ 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare
Rückenlehne
- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten;
Option: Verlängerte Radplatte als Radstands-
verlängerung
- ✓ Option: Einhandantrieb für Einhandfahrer
- ✓ Option: Besonders stabile Heavy-Duty Ausfüh-
rung für Nutzergewicht über 120 kg

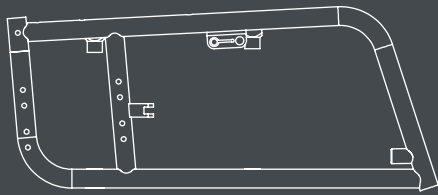

Das Video »PRO ACTIV, Faltrollstuhl Traveler – Komplett zerlegen« auf youtube.com zeigt das komplette Zerlegen für den Transport und den schnellen Aufbau des TRAVELERS.



»Ergonomische Rückenschale« (Option): Durch die abnehmbare Variante der Rückenschale lässt sich der TRAVELER auch weiterhin problemlos falten.



Der TRAVELER ist der mit Abstand verwindungssteifste Faltrollstuhl. Er kann auch mit Adaptivbikes und Zuggeräten kombiniert werden.



So groß, wie die Flexibilität des TRAVELERS im täglichen Einsatz ist, so klein ist er, wenn er transportiert werden soll.

Die Möglichkeit des eigenständigen Ein- und Ausladens des Rollstuhls beim Auto-Transport bietet Selbstständigkeit. Komplett zusammengelegt passt er sogar in eine Sporttasche. Darüber hinaus kann

dieser Mini im Flugzeug als Handgepäck transportiert werden!

Der Faltrollstuhl TRAVELER ist ein Aktiv-Rollstuhl, der Ihnen maximale Mobilität bietet. Mit der extrem verwindungssteifen und zuverlässigen Faltmechanik vereinigt der TRAVELER die Fahreigenschaften eines Starrrahmens mit den Vorzügen eines Faltroll-

stuhls. Außerdem kann der TRAVELER im Sitzen durch den innovativen Faltmechanismus angefalt werden, sodass viele Engpässe problemlos zu bewältigen sind.

TRAVELER 4ALL

Ergo-Serie

MERKMALE DER ERGO-SERIE:

- Filigrane Rahmengemetrie mit ergonomischem Sitzknick. Stabile Sitzposition durch automatisches Sitzgefälle von 3 cm und »Tuberstopp«.
- Das neue Bremskonzept der Integralbremse (Option). Optimale Bremskraft und schönes Design.
- Schmales Seitenteil. Beim Abklappen der Rückenlehne folgt das Seitenteil dem Rahmenverlauf für ein möglichst kleines Packmaß und optimalen Freiraum beim Verladen.




Die »Integral-Feststellbremse« ist komfortabel in der Bedienung. Bei geöffneter Bremse ist diese komplett unter den Rahmen geschwenkt, sodass ein Freiraum für Finger- und Handbewegung entsteht.

- ✓ Anfallen im Rollstuhl sitzend möglich
- ✓ Packmaß ab 17 x 35 x 58 cm
- ✓ Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung über Radplatten und verstellbares Faltmechanismus-Mittelteil
- ✓ Einstellbare Sitzneigung über Radplatten, Lenkradgabeln & Lenkräder

- ✓ Sitzknick für automatische Sitzneigung von 3 cm
- ✓ 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne
- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten; Option: Abnehmbare Radstandsverlängerung
- ✗ Kein Einhandantrieb möglich
- ✗ Keine Heavy-Duty Ausführung möglich

Daniela Keller im Seepark Pfullingen
(Foto: Timo Wetz)

& 4YOU

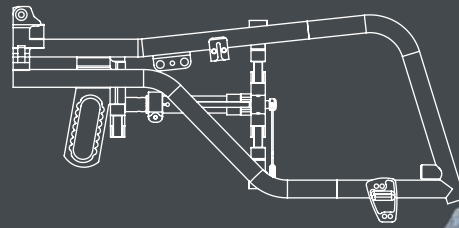

»Der TRAVELER ist für mich ein Stuhl für alle Fälle – egal ob Schreibtisch, Stadt oder Off-road, beim Tanzen, Biken oder mit Elektro-Power. Besonders praktisch ist die Stabilität und das kleine Packmaß – ob im Auto, Zug oder Flugzeug – das ist für mich echte Mobilität.«
(Klaus D. Herzog, „Außenminister“ der DRS RolliKids, Ideengeber, Mobilitätstrainer und Übungsleiter)



Robuster Carbon-Kleiderschutz (Option) und schmales Seitenteil. Beim Abklappen der Rückenlehne folgt das Seitenteil dem Rahmenverlauf, was ein möglichst kleines Packmaß zur Folge hat.



Die integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung in 1cm-Schritten und das verstellbare Faltmechanismus-Mittelteil ermöglichen Flexibilität in der Anpassung an die Anforderungen des Nutzers.



Ergo



Die Aktiv-Faltrollstühle TRAVELER 4all & 4you der Ergo-Serie bieten Ihnen maximale Mobilität. Das kleine Packmaß ab 17 x 35 x 58 cm ermöglicht die Mitnahme des Rollstuhls in einer Sporttasche und einfaches Verladen. Mit der extrem verwindungssteifen und zuverlässigen Faltmechanik vereinigen die TRAVELER-Rollstühle die Fahreigenschaften eines Starrahmenrollstuhls mit den Vorzügen eines Faltrollstuhls. Durch Anfallen kann die Sitzbreite um

ca. 15% verringert werden (ca. 5 – 10 cm).

Aufgrund der hohen Stabilität des Rahmens steht dem Adaptieren eines Adaptivbikes oder Zuggerätes nichts im Wege. Die 7-fach winkelverstellbare Rückenlehne bietet Flexibilität für die Sitzposition und die Anpassung des Rückenlehnenwinkels beim Fahren mit einem Adaptivbike oder Zuggerät.

Die Aktiv-Faltrollstühle TRAVELER 4all & 4you der Ergo-Serie zeichnen sich durch eine filigrane Rahmengestaltung mit ergonomischem Sitzknick aus und unterscheiden sich in den Möglichkeiten der individuellen Rahmengestaltung:

- Beim TRAVELER 4all sind 7 Rahmenparameter frei wählbar.
- Beim TRAVELER 4you sind 12 Rahmenparameter frei wählbar, wie beispielsweise Kniewinkel,

Rahmeneinzug und die Position des Lenkradlagerblocks. Jeder Rahmen ist ein individuell gefertigtes Unikat.



LITTY 4all | ab S. 26

Merkmale	■ Rollstuhl für Kleinkinder und Kinder ■ Sehr leicht ■ Viele Verstellmöglichkeiten
Sitzbreite	18 – 34 cm
Sitztiefe	20 – 35 cm
Rückenhöhe	20 – 30 cm
Sitzhöhe hinten	31 – 41 cm
Sitzhöhe vorne (5" Lenkrad)	34 – 44 cm
Radgrößen	20", 22", 24"
Rahmenform »Gerader Rahmen«	–
Rahmenform »V-Form«	–
Rahmenform »Abduziert«	–
Mitwachsfunktion der Sitzbreite	✓
Verstellbarkeit von Kippunkt und Sitzhöhe	✓ über Position der Sitzplatte im Kleiderschutz
Rückenlehne winkelverstellbar und abfaltbar, ohne Werkzeug	✗
Ergonomische Rückenschale	✓ nach Maß
Ergo Back Rückenlehnenbügel	✗
Einhandantrieb	✗
Vorsatzrad	✓
Schiebestange	✗
Rückverlagerte Schiebegriffe	✓
Zentral-Schiebegriff	✓
Max. Zuladung bis	50 kg

KINDER- & JUGENDROLLSTÜHLE ÜBERSICHT

Fragen? Rufen Sie uns an:
07427 9480-0



LITTY 4you | ab S. 26

- Rollstuhl für Kleinkinder und Kinder
- Sehr leicht
- Individuelle Rahmengestaltung

16 – 38 cm

18 – 38 cm

20 – 45 cm

31 – 42 cm

40 – 47 cm

20", 22", 24"

–

–

–

✓

✓ über Position der Sitzplatte im Kleiderschutz

✗

✓ nach Maß

✗

✗

✓

✗

✓

✓

✓

50 kg

BUDDY D3 | ab S. 28

- Kinder- und Jugendrollstuhl **ohne** Abduktion
- Stabiler Rahmen
- Umfangr. Zubehör & viele Verstellmöglichkeiten

18 – 38 cm

17 – 43 cm

20 – 48 cm

31 – 45 cm

40 – 50 cm

20", 22", 24"

✓

✗

✗

✓

✓ über Radplatte

✓ optional, 7-fach in 5° Schritten

✓ optional, nach Maß

✓ optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

✓ optional, mit 1°, 4°, 6°, 10° oder 12° Sturz

✓

✓

✓

✓ bis 50 kg Zuladung

100 kg

BUDDY D4 | ab S. 28

- Kinder- und Jugendrollstuhl **mit** Abduktion
- Stabiler Rahmen
- Umfangr. Zubehör & viele Verstellmöglichkeiten

18 – 38 cm

19 – 40 cm

20 – 48 cm

31 – 42 cm

40 – 47 cm

20", 22", 24"

✓

✗

✓

✓

✓ über Radplatte

✓ optional, 7-fach in 5° Schritten

✓ optional, nach Maß

✓ optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

✓ optional, mit 1°, 4°, 6°, 10° oder 12° Sturz

✓

✓

✓

✓ bis 50 kg Zuladung

100 kg

SPEEDY 4teen | ab S. 30

- Jugendrollstuhl mit sportlichem Design
- Stabiler Rahmen
- Umfangr. Zubehör & viele Verstellmöglichkeiten

26 – 38 cm

31 – 48 cm

20 – 48 cm

36 – 47 cm

40 – 50 cm

24", 26"

✓

✗

✓

✓

✓ über Radplatte

✓ optional, 7-fach in 5° Schritten

✓ optional, nach Maß

✓ optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung

✓ optional, mit 2° Sturz

✓

✗

✓

✗

100 kg

LITTY 4ALL



Foto: Timo Wetz



Die »Fußauflage nach hinten hochklappbar« (Option) erleichtert Kindern, die noch stehfähig sind, das Übersetzen aus dem und in den Rollstuhl.



LITTY 4you: Die Sitzplattenposition kann über Exzenterseiben nachjustiert werden.

LITTY 4all: Die Sitzplatte kann über das vorgegebene Raster im Kleiderschutz positioniert werden.

- ✓ Mitwachsfunktion der Sitzbreite
- ✓ Einstellung der Sitzposition durch Positionierung der Sitzplatte im Kleiderschutz über vorgegebenes Raster bzw. Exzenterseiben
- ✓ Rückenlehne ist fest im Kleiderschutz verschraubt (nicht winkelverstellbar oder abklappbar)
- ✓ Bremse im Kleiderschutz integriert
- ✗ Nutzung von Adaptivbikes und Zuggeräten nicht möglich
- ✗ Kein Einhandantrieb möglich

& 4YOU



»Der neue LITTY von PRO ACTIV ist ein – gerade für kleine und schmale Kinder – pfiffiger Stuhl. Durch das offene Rahmenkonzept und die integrierte Sitzeinheit wird er leichter als ein vergleichbarer »klassischer« Rolli. Der LITTY 4you lässt sich trotz der individuellen Ausrichtung gut einstellen und positionieren«. (Testbericht LITTY 4you, Magazin »B-Kids« 4/2011, Download unter www.proactiv-gmbh.de)



Der höhenverstellbare »Zentral-Schiebegriff mit abfaltbarem Griffbereich« (Option) ist im Griffbereich über ein Verzahnungsgelenk im Winkel einstellbar sowie komplett abfaltbar.



Der Bremshebel befindet sich im unmittelbaren Greifbereich des Kindes. Der Kleiderschutz folgt dem Radlauf in gleichmäßigem Abstand.

NEU



Die Kinderrollstühle LITTY 4all und 4you überzeugen durch ihre für Kinder optimale Rahmengeometrie. Das geringe Gesamtgewicht ab 6,7 kg und der optimale Leichtlauf machen den LITTY auch für Kinder mit geringer Armkraft zum geeigneten Gefährten.

Die Bremsbedienung im Kleiderschutz liegt im ergonomisch idealen Greifbereich des Kindes. Der Bremsbolzen ist außerhalb des Greifbereiches weit unterhalb der Antriebsradmitte angebracht. Die Fußstütze bietet aufgrund ihrer konstruktiven Gestaltung einen großen Einstell- und Positionierbereich.

Durch die Mitwachsfunktion wird der LITTY zu einem Begleiter für mehrere Jahre.

Die Rollstühle LITTY 4all & 4you unterscheiden sich in den Möglichkeiten der individuellen Rahmengestaltung und der Einstellung der Sitzposition:

■ Beim LITTY 4all sind 9 Rahmenparameter frei wählbar. Die Sitzbreite ist hier ab 18 cm möglich. Die Sitzposition bzw. die Position der Sitzplatte wird über das vorgegebene Raster im Kleiderschutz eingestellt. Dabei sind die Verstellmöglichkeiten wesentlich größer als beim LITTY 4you.

■ Beim LITTY 4you sind 10 Rahmenparameter frei wählbar mit wesentlich größeren Maßbereichen als beim LITTY 4all. Die Sitzbreite ist hier bereits ab 16 cm möglich. Die Sitzposition bzw. die Position der Sitzplatte kann über Exzentrerscheiben im Kleiderschutz justiert werden. Der Kleiderschutz wird für jeden LITTY 4you individuell gefertigt mit einem optimalen Einstellbereich für die Sitzplatte.

BUDDY



Die Sitzbreite wächst von 18 bis 38 cm durch die Anpassung der Querrohre mit.

Der BUDDY ist wahlweise mit gerader Rahmenform (BUDDY D3) oder mit Abduktionsrahmen (BUDDY D4) für mehr Beinfreiheit erhältlich.

- ✓ Mitwachsfunktion der Sitzbreite
- ✓ Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung über Radplatten
- ✓ Option: 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne
- ✓ Kniehebelbremse am oberen Rahmenrohr (auch mit langem Bremshebel)

- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten; Option: Verlängerte Radplatte als Radstandsverlängerung
- ✓ Option: Einhandantrieb für Einhandfahrer

Foto: Timo Wetz



Im Rahmen von Mobilitätstrainingskursen wird gezielt der Umgang mit dem Rollstuhl trainiert. PRO ACTIV empfiehlt Kindern und ihren Eltern einen solchen Kurs zu besuchen, da allen Teilnehmern dabei gezeigt wird, wie mobil man wirklich mit dem Rollstuhl sein kann. Informationen und Termine unter www.rollikids.de



Das Abfalten der winkelverstellbaren Rückenlehne (Option) und die einfache Abnehmbarkeit von Baugruppen ohne Werkzeug ermöglichen ein kleines Packmaß.



Durch einfache Ankopplung der Schiebestange, des Outdoor-Radvorsatzes oder des SPIKE Adaptivbikes wird der BUDDY zum geländegängigen Fahrzeug für Pflastersteine, Schotter und Waldwege.



Der Kinder- und Jugendrollstuhl BUDDY kann durch seine konstruktiven Besonderheiten mit dem Körperwachstum des Kindes in der Breite mitwachsen und ist dadurch ein zuverlässiger Begleiter für viele Jahre.

Ausgestattet mit der einfachen Sitzhöhenverstellung in 1cm-Schritten und der stufenlosen Kippunktverstellung, passt sich dieser Rollstuhl den

wachsenden Anforderungen seines Fahrers an. Durch sein geringes Gewicht und seine robuste Bauweise ist der BUDDY ein Begleiter für alle Abenteuer. So bekommen Kinder die Möglichkeit, die Welt auf eigene Faust zu erobern, und wilden Kinderspielen steht nichts im Wege.

Durch sein umfangreiches Zubehör kann man den BUDDY für alle Alltagssituationen rüsten. Kom-

biniert mit verschiedenen Adaptionen wie dem FREEWAY Lenkvorsatz oder dem SPIKE Adaptivbike können neue Aktionsbereiche erschlossen werden.

SPEEDY 4TEEN



Die integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung in 1cm-Schritten ermöglicht Flexibilität in der Anpassung an die Anforderungen des Nutzers.



»Rückenlehne mit Anpassrücken«: Individuell über Gurte einstellbares Rückensystem, das der Körperform ideal angepasst werden kann (im Bild ohne Rückenpolster dargestellt).

Foto: Peter Czajka

- ✓ Mitwachsfunktion der Sitzbreite
- ✓ Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung über Radplatten
- ✓ Option: 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne
- ✓ Kniehebelbremse am oberen Rahmenrohr
- ✓ Nutzbar mit Adaptivbikes und Zuggeräten;
Option: Radstandsverlängerung abnehmbar
- ✓ Option: Einhandantrieb für Einhandfahrer



Unsere Adaptivbikes und Zuggeräte finden Sie in unserem Produktkatalog »Handbikes, Zug- und Vorsatzgeräte« – schnell angefordert unter +49 (0) 7427 9480-0 und info@proactiv-gmbh.de oder zum Download unter www.proactiv-gmbh.de



Der SPEEDY 4teen ist optimal mit Adaptivbikes und Zuggeräten kombinierbar.



Die mit einem Handgriff abnehmbare Radstandsverlängerung sorgt für mehr Traktion beim Fahren mit Bikes und Zuggeräten.



Durch seine bewährte Mitwachsfunktion ist der Jugendrollstuhl SPEEDY 4teen ein Begleiter für viele Jahre.

Trotz der Zulademöglichkeit von 100 kg kommt der SPEEDY 4teen durch die gezielte Gewichsoptimierung lediglich auf ein Gesamtgewicht ab 9,2 kg. Ausgestattet mit der einfachen Sitzhöhen- und Kippunktverstellung in 1cm-Schritten passt

sich dieser Rollstuhl den wachsenden Anforderungen seines Fahrers an. Klare Rahmenführung und qualitativ hochwertige Verarbeitung verleihen dem Jugendrollstuhl einen sportlichen Charakter und ein geringes Packmaß.

Kombiniert mit verschiedenen Adaptionen wie dem FREEWAY Lenkvorsatz oder dem SPIKE Adaptivbike können neue Aktionsbereiche erschlossen werden.



SPORTROLLSTÜHLE ÜBERSICHT



Die PRO ACTIV Sportrollstühle haben eine völlig individuelle Rahmengometrie, die an die Sportart, den Sportler und dessen Position auf dem Feld angepasst wird. So sind Ihnen keine Grenzen in der Anpassung auf Ihre Bedürfnisse gesetzt! Unterschiedliche Rammbügel, Kippstützen und Fußbrettauflagen machen das Konzept perfekt! Mit diesem individuellen Konzept ist alles möglich! Fordern Sie uns mit einem Rollstuhl für Ihre Sportart.



SPEEDY 4basket | ab S. 34



SPEEDY 4tennis | ab S. 36



SPEEDY 4badminton | ab S. 38

Merkmale	■ Basketballrollstuhl ■ Robuster und fest verschweißter Rahmen mit individueller Rahmengometrie ■ Ausstattung für alle Spielpositionen	■ Tennisrollstuhl ■ Robuster und fest verschweißter Rahmen mit individueller Rahmengometrie ■ Große Auswahl an Optionen	■ Badmintonrollstuhl ■ Robuster und fest verschweißter Rahmen mit individueller Rahmengometrie ■ Große Auswahl an Optionen
Radsturz	12°, 15°, 18°, 20°	12°, 15°, 18°, 20°	12°, 15°, 18°, 20°
Ergonomische Rückenschale	optional, nach Maß	optional, nach Maß	optional, nach Maß
Ergo Back Rückenlehnenbügel	optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung	optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung	optional, nach Maß mit und ohne Lordoseunterstützung
Einhandantrieb	optional, mit 1°, 4°, 6°, 10° oder 12° Sturz	optional, mit 1°, 4°, 6°, 10° oder 12° Sturz	optional, mit 1°, 4°, 6°, 10° oder 12° Sturz
Zuladung Standard	bis 120 kg	bis 120 kg	bis 120 kg
Zuladung Heavy-Duty Version ¹	bis 150 kg	bis 150 kg	bis 150 kg

Unsere Sportrollstühle – folgende Maße können individuell ausgewählt werden:

- Sitzbreite
- Sitztiefe
- Rückenhöhe
- Unterschenkellänge
- Sitzhöhe hinten
- Sitzhöhe vorne
- Kippunkt
- Beginn des Rahmeneinzugs
- Rahmenlänge bis zum vorderen Rahmenbogen
- Kniewinkel
- Unterschenkelweite oben und unten
- Position des Kippstützenlagerblocks
- Position des Lenkradlagerblocks
- Abstand zwischen den Lenkradlagerblöcken

Jeder Sportrollstuhl ist ein Unikat!

Fragen? Rufen Sie uns an:
07427 9480-0



Alle Maße sind in 1 cm-Schritten erhältlich. Individuelle Maße oder Zuladung auf Anfrage.

¹ Individueller Rahmen mit Verstärkung.

SPEEDY 4BASKET




Ausstattung mit Einhandantrieb und geschraubter Radplatte ermöglicht die Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung um ca. 1 bis 2 cm. Extrem wenig durch Antriebsradsturz von bis zu 12°.



Es sind verschiedene Bügelgeometrien erhältlich, passend zu den geforderten Spielpositionen.



Spiel der Oberliga Süd
SKV Ravensburg 2 – RSKV Tübingen
(Foto: Werner Schorp)

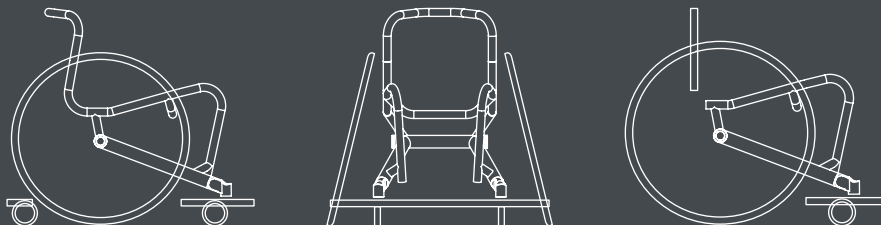

Sportangebote und -vereine finden Sie unter www.drs.org

PRO ACTIV ist Partner des DRS.



Es können verschiedene Fußbrettauflagen wie »vorne gekantet« oder »Box-Form« gewählt werden.



Je nach Spielposition und persönlicher Anforderung kann zwischen Mittelkipfstütze oder beidseitig angebrachten Kippstützen gewählt werden – für absolute Standsicherheit im harten Mannschaftssport.

Der Basketballrollstuhl SPEEDY 4basket ist mit 15 frei wählbaren Rahmenparametern der Individualist seiner Klasse.

Durch seine konstruktiven Besonderheiten und seine puristische Linienführung werden Drehfreudigkeit, gutes Reaktionsverhalten, Beschleunigung und eine hohe Fahrgeschwindigkeit mit einem modernen Design verbunden.

Dieses Sportgerät kann für die Anforderungen von Spielposition und Spieler individuell ausgestattet werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, die komplette Sitzeinheit nach individuellen Maßen aus einem Aluminium-Rohr zu biegen. Dies hat eine enorme Gewichtsersparnis zur Folge. Die starre Sitz- und Rückeneinheit ist absolut spielfrei, sodass der Rollstuhl jeder noch so kleinen Körperbewegung unmittelbar folgt und direkt reagiert.



SPEEDY 4TENNIS




Die längeneinstellbare Fußbrettauflage als »Box-Form« sorgt für die optimale Positionierung der Füße.



»Rückenlehne Ergo Back mit Rückenpolster«: Stabile und individuelle Rückenlehne mit Lordoseunterstützung.

Sabine Ellerbrock (Paralympics-Teilnehmerin) bei den Salzburg Open
(Foto: Hartwig Ellerbrock)

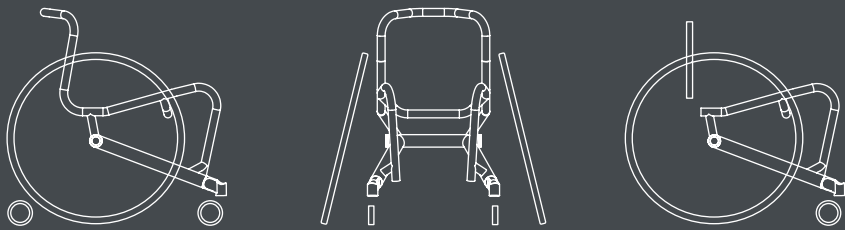

»Der SPEEDY 4tennis: Ein leichter, wendiger Stuhl mit perfekten Fahreigenschaften – ein besseres Sportgerät kann ich mir nicht vorstellen!«
(Sabine Ellerbrock)



»Sitzbespannung Offenes Gurtsystem«: Sehr atmungsaktives Sitzsystem mit individuell über Gurte einstellbarer Druckverteilung.



Mit einem Handgriff lässt sich das Kippstützenrad in der Höhe einstellen.



Der Tennis-Rahmen des SPEEDY 4tennis bietet einen optimalen Spielfreiraum, da die unteren Rahmenrohre vorne mit dem Lenkradlagerblock abschließen.

Mit 15 frei wählbaren Rahmenparametern kann der SPEEDY 4tennis perfekt an seinen Fahrer angepasst werden. Die Gestaltung aus hochfesten Oversized-Rohren garantiert eine

hervorragende Verwindungssteifigkeit und ein direktes Reaktionsverhalten, ohne auf Standstabilität zu verzichten.

Entsprechend der Bodenbeschaffenheit des Spielfeldes und der Spielgewohnheiten kann die Kippstütze mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden.

Es gibt die Möglichkeit, die komplette Sitzereinheit nach individuellen Maßen aus einem Aluminium-Rohr zu biegen. Dies hat eine enorme Gewichtersparnis zur Folge. Die starre Sitz- und Rückeneinheit ist absolut spielfrei, sodass der Rollstuhl jeder noch so kleinen Körperbewegung unmittelbar folgt und direkt reagiert.

SPEEDY 4BADMINTON






Die längeneinstellbare Fußbrettauflage als »Box-Form« sorgt für die optimale Positionierung der Füße.



Der hohe Greifringanbau ermöglicht optimale Kraftübersetzung und erstaunliche Beschleunigung.

Young wook kim (aus Korea) beim Training
(Foto: Young wook kim)

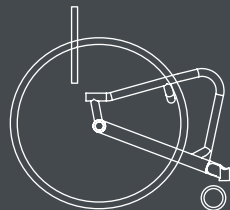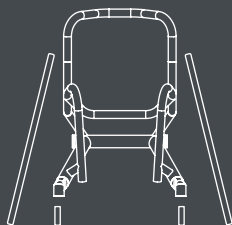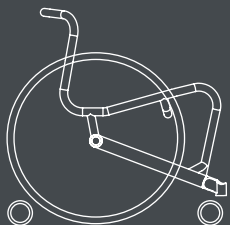

Marcel Hörenbaum (Spitzensportler im Rollstuhl-Badminton) sagt über sein Sportgerät: »Der SPEEDY 4badminton ist ein erstklassiges Sportgerät und bietet einen super Fahrspaß!«



Die weit nach hinten gezogenen Kippstützen sorgen für absolute Standsicherheit.



Die optionale Ausstellung der Rückenlehne bietet zusätzliche Seitenstabilität.



Der Badminton-Rahmen des SPEEDY 4badminton bietet aufgrund der weit herausragenden Kippstützen die Möglichkeit einer extrem aggressiven Positionierung des hinteren Achsrohres.

Die absolute Standsicherheit wird durch zwei weit nach hinten gezogene Kippstützen und einen breiten Radstand der Lenkräder garantiert. Verbunden mit einem großen Radsturz führt dies zu einer extre-

men Wendigkeit und einem optimalen Beschleunigungsverhalten des Rollstuhls. Hier liegt letztendlich das Geheimnis des Erfolgs für jeden Badminton-Spieler!

Mit 15 frei wählbaren Rahmenparametern kann der SPEEDY 4badminton perfekt an seinen Fahrer angepasst werden.

Es gibt die Möglichkeit, die komplette Sitzeinheit nach individuellen Maßen aus einem Aluminium-Rohr zu biegen. Dies hat eine enorme Gewichtsersparnis zur Folge. Die starre Sitz- und Rückeneinheit ist absolut spielfrei, sodass der Rollstuhl jeder noch so kleinen Körperbewegung unmittelbar folgt und direkt reagiert.

Rückensysteme



Ergonomische Rückenschale

Individuell gelaserte und stabile Aluminium-Rückenschale mit viel Bewegungsfreiheit für Schultern und Arme. Individuelle Einstellung der Lordosestütze durch Gurte. 7-fach winkelverstellbar und abfaltbar mit integrierten Alu-Seitenteilen. Geringes Gewicht.



Rückenlehne mit Anpassrücken und Rückenpolster

Individuell über Gurte einstellbares Rückensystem, das der Körperform ideal angepasst werden kann. 7-fach durch den Nutzer selbst mit einem Handgriff winkelverstellbar mit integrierten Alu-Seitenteilen. Durch das komplette Abfalten der Rückenlehne wird das Packmaß deutlich reduziert.



Rückenlehne »Ergo Back« mit Rückenpolster

Stabile und individuelle Rückenlehne mit Lordoseunterstützung. Der Rückenbügel gibt einen optisch schönen Effekt, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken, und eine Möglichkeit der Entlastung des Rückens durch Zurücklehnen.



Rückenlehne »Ergo Back« mit Rückenschale

Sehr stabile und individuelle Rückenlehne. Durch die nach hinten ausgeformte Kontur des Rückenbügels entsteht ein weicher Übergang der Rückenschale zum Rückenlehnenbügel. Bequemes Zurücklehnen zur Rückenentlastung ist möglich, da der Rückenlehnenbügel oben eine progressive Stützwirkung hat. 7-fach winkelverstellbar und abfaltbar mit integrierten Seitenteilen.



Sitzsysteme



Sitzplatte

Stabiles Sitzsystem ohne Durchhang. Möglicher Grundträger für den Aufbau von individuellen, anatomisch angeformten Sitzsystemen.



Sitzbespannung »Body Contour«

Sitzbespannung mit federnder Wirkung. Sehr atmungsaktiv und absorbiert Stöße. Der Stoff ist sehr robust und doppelt genäht, was dem »Hängematteneffekt« entgegen wirkt. Unterstützt Dekubitusprophylaxe.



Sitzbespannung »Offenes Gurtsystem«

Individuell über Gurte einstellbare Druckverteilung. Unterstützt atmungsaktive Kissensysteme.



Sitzkissen

Das Standard-Sitzkissen besteht aus einem 1-schichtigen, sehr hochwertigen Schaumstoff. Alternativ kann das Sitzkissen »Anti Dekubitus« gewählt werden. Dieses Relaxschaumstoffkissen besteht aus einem Trägerschaum für die Stabilität und einem thermoelastischen Schaum, der sich bei Wärme optimal an die Körperform anpasst und so bestmögliche Druckentlastung bietet.



Einhandantrieb



Zum Fahren des Rollstuhls behinderungsbedingt mit nur einem Arm, können die Modelle TRAVELER, SPEEDY A1, SPEEDY 4all & 4you (auch Ergo-Serie), SPEEDY 4teen und BUDDY mit einem Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen ausgestattet werden.

Der kleinere, innenliegende Greifring ist über eine Kardanwelle mit dem gegenüberliegenden Rad verbunden. Zur Geradeausfahrt werden beide Greifringe gemeinsam angeschoben. Drehen auf der Stelle erreicht man durch Drehen der Greifringe in entgegengesetzte Richtung.



Durch einen Antriebsradsturz von bis zu 12° wird eine extrem hohe Wendigkeit erzielt. Einsatz im Sport möglich.



Für das einfache Handling sind die Antriebsräder über Steckachse abnehmbar. Die Antriebsseite ist durch Umstecken der Räder einfach wechselbar.



»Kniehebelbremse mit Einhandbedienung«:
Durch das Betätigen der Bremse auf der einen Seite...



...werden über einen Bowdenzug die Bremsbolzen auf beiden Seiten bewegt.



Sämtliche Rollstuhl-Baugruppen und Zubehör finden Sie unter
www.proactiv-gmbh.de/rollstuehle_baugruppen_zubehoer

WEITERE OPTIONEN

Baugruppen und Zubehör



Lenkradgabeln

Die Federgabel mit Querlenkeraufhängung sorgt für eine gefederte Hindernisüberwindung. Es können harte Laufringe eingesetzt werden, um die optimale Leichtläufigkeit zu erreichen. Die härteren Laufeigenschaften werden durch die Federung der Radaufhängung und des Rades kompensiert. Damit wird der optimale Fahrkomfort erzielt. Weitere Lenkradgabeln unter www.proactiv-gmbh.de



Lenkräder

PRO ACTIV bietet eine Vielzahl an verschiedenen Lenkrädern an, wie beispielsweise das stabile 5"-Lenkrad mit Alu-Felge. Unter www.proactiv-gmbh.de finden Sie eine Übersicht über alle angebotenen Lenkräder mit Bewertungen in unterschiedlichen Kategorien.



Fußstützen

Es können verschiedene Fußstützen gewählt werden, wie beispielsweise die Fußstütze »Nach hinten hochfaltbar«. Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze ermöglicht einen einfachen Transfer und verringert das Packmaß. Weitere Fußstützen unter www.proactiv-gmbh.de



Schiebegriffe und -stangen

PRO ACTIV bietet unterschiedliche Lösungen für Schiebevorrrichtungen. Im Bild ist als Beispiel der »Zentral-Schiebegriff mit abfaltbarem Griffbereich« gezeigt, der sich durch einfache Verstellmöglichkeiten in Höhe und Winkel sowie durch gute Bewegungsfreiheit für den Rollstuhlfahrer auszeichnet. Weitere Schiebegriffe und -stangen finden Sie unter www.proactiv-gmbh.de



Unsere Adaptivbikes und Zuggeräte finden Sie in unserem Produktkatalog „Handbikes, Zug- und Vorsatzgeräte“ – schnell angefordert unter +49 (0) 7427 9480-0 und info@proactiv-gmbh.de oder zum Download unter www.proactiv-gmbh.de



Kippsicherungen

Für jedes Rollstuhl-Modell bietet PRO ACTIV passende Kippstützen an, welche für das Überwinden von Hindernissen mit wenigen Handgriffen in Passivstellung gebracht werden können. In Aktivstellung vermindern Sie die Gefahr, nach hinten zu kippen. Informationen zu Kippstützen finden Sie unter www.proactiv-gmbh.de



Kleiderschutz

PRO ACTIV bietet stabile und formschöne Kleiderschutz-Modelle aus Aluminium, GFK und Carbon an. Der Aluminium- und der Carbon-Kleiderschutz bieten eine hohe Flexibilität bei der Anpassung an den Radlauf (auch im Nachhinein), da Langlöcher zur optimalen Einstellung vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.proactiv-gmbh.de



Bremsen

Es können Kniehebelbremsen mit unterschiedlichen Bremshebeln gewählt werden wie beispielsweise mit langem, abklappbarem oder ausgestelltem Bremshebel, sodass auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann. Weitere Bremsen wie die Integral-Feststellbremse oder die Bremse für die Begleitperson finden Sie unter www.proactiv-gmbh.de



Antriebsrad & Co.

Im Bereich der Antriebsräder kann aus einer großen Palette an Felgen (z.B. PRO ACTIV und Spinergy), Bereifungen und Greifringen gewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.proactiv-gmbh.de

Crash tested



Folgende Rollstuhlmodelle sind für den Transport im Fahrzeug freigegeben:

- ✓ BUDDY
- ✓ SPEEDY
- ✓ TRAVELER



Unsere Produkte wurden in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Prüfinstitut und mit geprüften Rückhaltesystemen nach ISO 10542 getestet.

Die Tests haben gezeigt, dass unsere Rollstühle den ISO 7176-19-Spezifikationen entsprechen. Die geprüften Rollstühle sind in Verbindung mit einem Kraftknotensystem für den Fahrzeugtransport freigegeben.

Kraftknotensystem



Die Crash getesteten Rollstühle sind mit werkseitiger Ausstattung eines Kraftknotensystems, sowie einer vorderen Anbindung über Gurtschlösser erhältlich. Es kann auch eine Palette an Zube-

hör zum Kraftknotensystem bestellt werden, wie beispielsweise Beckengurte in unterschiedlichen Längen, Schultergurte, Retraktoren, Kopfstützenhalterung und -polsterung.

Für Ihre Sicherheit!

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben. Unsere Produkte sollen in jeder Lebenssituation mithalten und maximale Mobilität bieten. Aus diesem Grund testen wir die Stabilität unserer Produkte über den ISO Standard

hinaus. Dazu gehört für uns, dass wir uns einen Standard hinsichtlich Prüfzeiten und Belastungen gesetzt haben, der weit über den Anforderungen der Norm liegt.



Da wir immer aktuelle und trendige Farben anbieten möchten, können sich auch kurzfristig Änderungen in der Farbauswahl ergeben.

Bitte informieren Sie sich unter www.proactiv-gmbh.de/farben über das aktuelle Angebot. Hier können Sie auch Bilder zu Kombinationsmöglichkeiten einsehen.

Einfarbdesigns

	Gestrahlt, ohne Beschichtung		Violett, glanz
	Gestrahlt, farblos beschichtet, glanz		Pink Magenta, glanz RAL 4010 Pink Magenta, matt RAL 4010
	Weiß, glanz RAL 9016 Weiß, matt RAL 9016		Light cyan, glanz Light cyan, matt
	Brillant Silber, glanz		Pastellblau, glanz RAL 5024 Pastellblau, matt RAL 5024
	Anthrazit, glanz RAL 7016 Anthrazit, matt RAL 7016		Sky blue, glanz
	Schwarz, glanz RAL 9005 Schwarz, matt RAL 9005		Marine Blau, glanz Marine Blau, matt
	Tiefschwarz Effekt Silber, glanz		Apple green, glanz Apple green, matt
	Rein Orange, glanz RAL 2004 Rein Orange, matt RAL 2004		Lemon green, glanz Lemon green, matt
	Fire Red, glanz Fire Red, matt		Gelb, glanz RAL 1023 Gelb, matt RAL 1023

Zweifarbdesigns

Bei Zweifarbdesigns können jeweils eine Grundfarbe und eine Designfarbe kombiniert werden (nähere Informationen finden Sie unter www.proactiv-gmbh.de/farben).

Grundfarben (am Rahmen hinten)

	Weiß
	Silber
	Anthrazit
	Schwarz
	Light cyan
	Pastellblau
	Lemon green
	Gelb

Designfarben (am Rahmen vorne)

	Gelb
	Lemon green
	Blau
	Chili
	Rein Orange
	Cappuccino
	Schwarz

Designfarbe Chili
Grundfarbe weiß

Option:
Kleiderschutz in
Designfarbe





www.proactiv-gmbh.de



QR-Code direkt mit dem Handy scannen
und mehr über unsere Produkte erfahren.

PRO ACTIV
Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0) 74 27 94 80-0
Fax +49 (0) 74 27 94 80-70 25
info@proactiv-gmbh.de



Der PRO ACTIV-Fachhändler in Ihrer Nähe: