




PROACTIV®



LITTY 4you

CON LA LITTY 4YOU,
LA LIBERTÀ CRESCE CON VOI.

La carrozzina per bambini LITTY 4you convince per la geometria personalizzata del telaio, appositamente studiata per i bambini. Grazie al peso ridotto di 6,7 kg e alla scorrevolezza ottimale, LITTY 4you è particolarmente maneggevole e facile da manovrare, ideale per i bambini con una minore forza delle braccia. Il telaio senza tubi anteriori limitanti consente di posizionare il sedile con la massima abduzione. La LITTY 4you può essere equipaggiata come optional con il motore ausiliario e-motion di Alber, che aumenta la potenza.

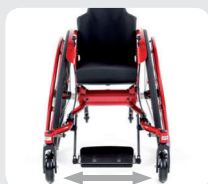


#FunzioneDiCrescita

La LITTY 4you cresce con il bambino grazie a componenti intercambiabili, che la rendono una compagna affidabile per gli anni a venire.




#Individualità

Con 10 parametri di telaio selezionabili e una larghezza della seduta a partire da 16 cm, la LITTY 4you offre una personalizzazione ottimale. Il telaio e il copriabit sono progettati e realizzati individualmente per ogni LITTY 4you.

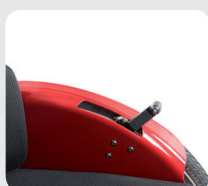

#Sicurezza

Il comando del freno a leva è posizionata in modo ergonomico nella protezione degli indumenti. Il bullone del freno si trova all'esterno dell'area di presa per evitare che le dita rimangano intrappolate.

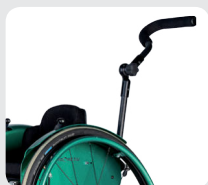

#Supporto

Diverse maniglie di spinta e barre offrono un supporto durante gli spostamenti in avanti, mentre i freni presenti consentono di controllare la velocità.



REALIZZATA PER I BAMBINI, È PRONTA PER L'AVVENTURA.

La **LITTY 4you** è personalizzata in base alle esigenze del bambino, dalle dimensioni del telaio agli aggiuntivi. Numerose opzioni come poggipiedi, freni, maniglie di spinta, schienale e sistemi di seduta, nonché ruote motrici e sterzanti, offrono un'ampia possibilità di personalizzazione.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Il "poggipiedi ripiegabile all'indietro" facilita il trasferimento dei bambini che sono ancora in grado di stare in piedi.



Il tavolo terapeutico offre una pratica superficie da lavoro, può essere rimosso senza attrezzi ed è regolabile in continuo in altezza e angolazione per una personalizzazione ottimale.




La **ruota anteriore Outdoor** rende la LITTY 4you adatta all'uso fuoristrada su marciapiedi, ghiaia e sentieri forestali. sollevata da terra e la ruota da 12" supera i dossi senza sforzo. Grazie al morsetto a sgancio rapido, l'attacco della ruota può essere montato facilmente e senza attrezzi.

DATI TECNICI

Larghezza del sedile:	16 - 38 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	18 - 38 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 45 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	20 - 45 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	31 - 42 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	34 - 47 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	1 - 10 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 6,7 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 50 kg

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

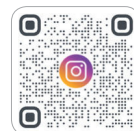

PRO ACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 09/2024_01

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.