



TRAVELER 4all Ergo

ERGONOMISCH SITZEN,
MÜHELOS REISEN.

Der Aktiv-Faltrollstuhl TRAVELER 4all Ergo zeichnet sich durch seine filigrane Rahmengeometrie mit ergonomischem Sitzknick aus. Du kannst 9 Rahmenparameter wählen, um ihn genau auf Deine Bedürfnisse abzustimmen. Mit einem kompakten Packmaß ab 17 x 35 x 58 cm passt er sogar in eine Sporttasche. Aufgrund der minimierten Rahmengeometrie, dem bewährten Faltmechanismus, dem einfachen Abklappen der Rückenlehne und der Abnehmbarkeit von Baugruppen ohne Werkzeug ist er zudem ideal zum selbstständigen Verladen.




#Zuverlässigkeit

Dank seiner hervorragenden Stabilität kannst Du den TRAVELER 4all Ergo mit Adaptivbikes, Zug- & Vorsatzgeräten sowie weiteren Adaptionen kombinieren.



#Flexibilität

Viele Einstellungen, wie Kippunkt, Sitzhöhe, Sitzneigung oder Rückenwinkel, kannst Du auch nachträglich auf Deine Bedürfnisse anpassen.

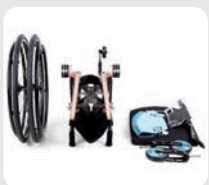

#Selbstständigkeit

Mit seinem kleinen Packmaß, der abklappbaren Rückenlehne und den werkzeuglos abnehmbaren Baugruppen ist der TRAVELER 4all Ergo leicht zu transportieren.



#MehrMobilität

Durch das einfache Anfallen kannst Du die Sitzbreite (im Rollstuhl sitzend) um 15 % bzw. 5-10 cm reduzieren, um mühelos schmale Durchgänge passieren zu können.



PERFEKT ANGEPASST AN DEIN LEBEN.

Dein **TRAVELER 4all Ergo** wird ganz nach Deinen Wünschen gefertigt – von den Rahmenmaßen bis zur Ausstattung. Du hast die Wahl bei Optionen wie Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffen, Rücken- und Sitzsystemen, Kleiderschützern, Armauflagen sowie Antriebs- und Lenkrädern, um Deinen TRAVELER 4all Ergo perfekt auf Dich abzustimmen.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Formschöne Integral-Feststellbremse mit komfortabler und sicherer Bedienung.



Die Alu-Felge im eleganten 3-Speichen-Design vereint maximale Stabilität mit einem ultraleichten Gewicht – für höchste Ansprüche ohne Kompromisse.



TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	33 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	36 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	37 - 51 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	39 - 45 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	44 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	3 - 11 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 11,2 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.