



PROACTIV®



BUDDY


DER KINDERROLLSTUHL FÜRS ABENTEUER LEBEN.

Der **BUDDY** ist ein kompakter, besonders anpassungsfähiger Kinder- und Jugendrollstuhl, der mitwächst und für alles bereit ist: Alltag, Therapie, Spielplatz oder große Ausflüge. Er fördert Eigenständigkeit, Mobilität und therapeutische Entwicklung und begleitet Kinder über viele Jahre hinweg sicher und zuverlässig. Mit seiner stabilen Rahmenkonstruktion, intelligenter Mitwachsfunktion und zahlreichen Optionen passt sich der BUDDY dem Leben des Kindes optimal an – nicht umgekehrt.



#Mitwachsfunktion

Der BUDDY wächst mit – in Breite, Höhe und Tiefe. Dank seiner fein justierbaren Sitzhöhe und Kippunktverstellung passt er sich an die Bedürfnisse des Kindes an. So bleibt der BUDDY ein treuer Begleiter über Jahre hinweg.

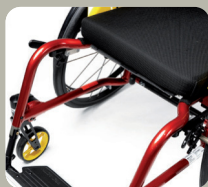

#GesundeHaltung

Der BUDDY unterstützt eine gesunde Sitzhaltung und fördert koordinierte Bewegungsabläufe – die abduzierte Rahmenform sorgt dabei für zusätzliche Beinfreiheit und optimale Positionierungsmöglichkeiten.



#CleverGebremst

Der BUDDY bietet verschiedene Kniehebelbremssysteme, die auf die Bedürfnisse von Kind und Begleitperson abgestimmt sind. Besonders kindgerecht ist das integrierte Kniehebelbremssystem im Kleiderschutz.



#Unterstützung

Zwei Rückensysteme sorgen für optimalen Sitzkomfort: ein leichter Anpasserrücken mit individuellen Einstellmöglichkeiten oder eine stabile Rückenschale mit Lordosestütze.




INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR FÜR JEDES BEDÜRFNIS

Der **BUDDY** lässt sich mit zahlreichen Optionen genau auf die eigenen Anforderungen abstimmen. Ob Einhandantrieb, Therapietisch, Outdoor-Radvorsatz, flexible Fußstützen oder verschiedene Brems- und Rückensysteme – jedes Anbauteil passt sich den individuellen Bedürfnissen des Kindes an.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Der „Fußbügel nach hinten hochfaltbar“ erleichtert Kindern, die noch stehfähig sind, das Übersetzen aus dem und in den Rollstuhl.

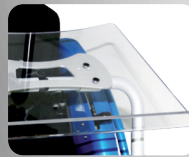

Der Therapie-Tisch bietet eine praktische Arbeitsfläche, ist werkzeuglos abnehmbar und stufenlos in Höhe und Winkel einstellbar für eine optimale Anpassung.



Mit dem **Outdoor-Radvorsatz** wird der BUDDY geländetauglich für Pflaster, Schotter und Waldwege. Die Lenkräder werden vom Boden abgehoben und das 12" Rad überwindet Unebenheiten mühelos. Dank Schnellspannklammer lässt sich der Radvorsatz einfach und werkzeuglos anbringen.




TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	20 - 46 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	22 - 40 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	20 - 47 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	31 - 37 cm [20" Bereifung] 33,5 - 39,5 cm [22" Bereifung] 36 - 42 cm [24" Bereifung] (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	40 - 47 cm (in 1 cm-Schritten)
Kipppunkt:	5 - 10 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 9,5 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 100 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

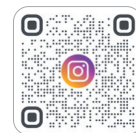

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 06/2026
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.